



СПЕКТР ДПЛ

СИСТЕМА ОМОЛОДЖЕННЯ ШКІРИ




Нове покоління

Німецький DPL технології



ARE YOU STILL WORRYING ABOUT
OUR SKIN?

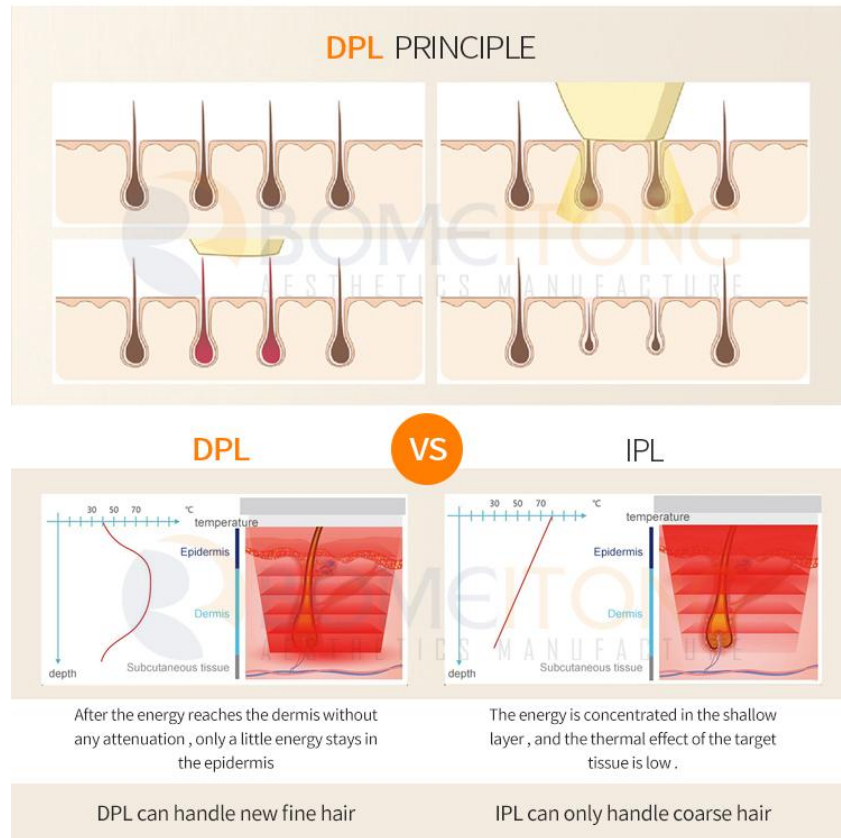

Теорія лікування

...

Апарат використовує технологію точного омолодження шкіри DPL (Dye Pulsed Light), яка є фотоомолодженням шкіри вузького спектру (DPL), це нова технологія оптичного омолодження шкіри, яка відрізняється від традиційної технології (наприклад, IPL).), Нова технологія може стимулювати імпульсне світло з вузьким спектром 100 нм, яке також містить піки поглинання меланіну, кисню та гемоглобіну, забезпечуючи точну концентрацію ефективної терапевтичної енергії, таким чином швидко та ефективно вирішуючи проблеми веснянок і телеангіектазій (червоного обличчя) на обличчі.

Технологія делікатного імпульсного світла з вузьким спектром 100 нм:

Технологія делікатного омолодження шкіри DPL

...

Вибрані 500-600 нм і 550-650 нм покривають піки поглинання пігменту та насиченого киснем гемоглобіну в шкірі, які є більш вибірковыми, ніж традиційне IPL і клінічне лікування можуть досягти кращих результатів і скоротити час лікування;

Довжина хвилі 500-600 нм: вирішує проблему старіння судин і омолоджує світлу шкіру.



1. Застосовується для лікування телеангіектазії, червоні плями від прищів, чутлива шкіра, гормонозалежний дерматит, розацеа та ін проблеми поверхневих судин, с краща негайна відповідь і кращий лікувальний ефект.



2. Використовується для світлошкірої шкіри омолодження, це може покращити тьмяну шкіру, великі пори, грубу шкіру, дрібні зморшки та інші проблеми старіння.



3. Лікування нульового болю, фікс. точкове лікування та ковзання.

Технологія делікатного імпульсного світла з вузьким спектром 100 нм: Технологія делікатного омолодження шкіри DPL



Вибрані 500-600 нм і 550-650 нм покривають піки поглинання пігменту та насиченого киснем гемоглобіну в шкірі, які є більш вибірковими, ніж традиційні IPL і клінічне лікування можуть досягти кращих результатів і скоротити час лікування;

Довжина хвилі 550-650 нм: Вирішіть проблему пігментації та омолодження шкіри:

1. Використовується для лікування веснянок, сонячних опіків, вікових плям та інших поверхневих світлих плям, що значно краще для світлих плям;
2. Він також може покращити тон шкіри при проблемах омолодження темної шкіри. Він лікує проблеми старіння, такі як тьмяність, великі пори, груба шкіра та дрібні зморшки.



Кілька довжин хвиль доступні для використання на всіх шкірах
Автоматично визначені 5 ручок на ваш вибір

...



VR (500-600 nm)

Видаляють судинну та ім
почервоніння



PR (550-650 nm)

Видалення веснянок, сонячних опіків, вікових плям,



AR (420-520 nm)

Іполегшити прищі, видалити шрами від прищів



SR (560-950 nm)

Засіб для видалення пор, відбілювання шкіри,
підтяжка шкіри, боротьба з набряками, темні кола тощо



HR (650 nm-950 nm)

Постійне та безболісне видалення волосся.
Видалення небажаного волосся на всьому тілі



Багатофункціональна терапевтична платформа



Видалення волосся



Омолодження шкіри



Підтяжка шкіри



Видалення прищів



Видалення пігменту



Поразка судин

ПЛ



Переваги SPECTRUM DPL

Переваги технології Superphotons:

П'ять основних технологічних інновацій і реформ

1. Технологія делікатного імпульсного світла з вузьким спектром 100 нм.

Швидко та ефективно усунути веснянки на обличчі та телеангіоектазії (проблеми червоного обличчя).

2. Core of Light, імпортований з Німеччини.

Ксенонова лампа є основою енергії. Світло використовує німецьку оригінальну імпортовану ксенонову лампу, яка отримала багато запатентованих технологій у всьому світі, а мінімальне ефективне випромінювання світла становить 1 000 000 разів.

3. Блок живлення ОПТ.

енергія рівномірна та стабільна, що не тільки покращує відчуття комфорту від лікування, але й підтримує високу енергію.

4. Кілька довжин хвиль доступні для використання на всіх шкірах.

П'ять ручок на ваш вибір: HR, SR, PR, VR, AR.

5. Технологія In-motion.

Швидкий режим з високою частотою 10 Гц, що прискорює роботу та скорочує час лікування.



DPL ПРОТИ IPL


Тип	DPL	IPL
Тривалість імпульсу	Вузький спектр 100 нм (550-650 нм)	широкий спектр (560-950 нм)
Поглинання меланіну	більше ніж2-5 разівIPL	Низький
Судинна абсорбція	3 разивище, ніж IPL	Низький
час лікування	2-3 рази	4-6 разів
Ефект	Швидкість оформлення більше ніж90%, яка буде далі розбавити випадки, які були оброблені IPL та не мають наступних зміни.	Швидкість оформлення становить близько 70%, залишаючи легкий слід
Комфорт	Низька загальна енергія, Комфорт - це значно вище, ніж IPL	Висока загальна енергія, Біль, низький комфорт



Комплексна система DPL

...


Розумний центр обробки даних клініки, система самоперевірки, зручний інтерфейс роботи.

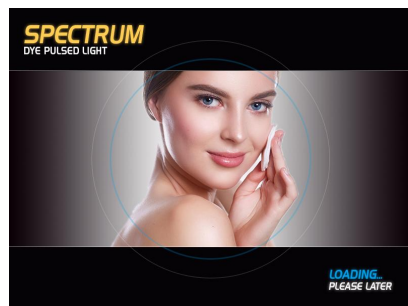

Завантажувальний логотип



Вибір мови

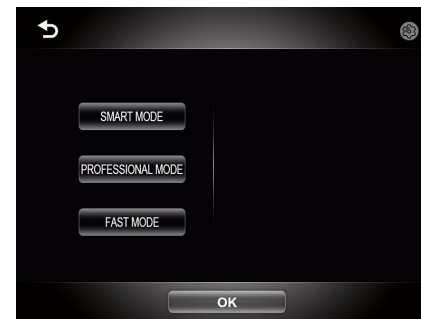


Вибір ручки



Розумний режим



Професійний режим

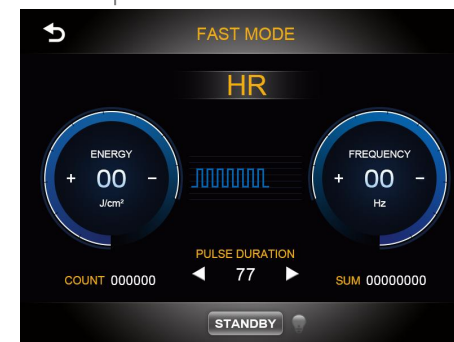

Швидкий режим

Специфікація DPL

Довжина хвилі	VR 500-600 нм PR: 550-650 нм
	Додатково: (SR: 560-950 нм HR: 650-950 нм, AR: 420-520 нм)
Флюенс	ЧСС 5-30 Дж/см ² SR: 5-25 Дж/см ² (PR, VR, AR)
Частота	HR1-8 Гц SR1-3 Гц (PR, VR, AR)
РЧ потужність	1-30 Вт
Вхідна потужність	4000 Вт
Джерело живлення	Чистий сапфір
Лампа	Лампа німецького імпорту
Розмір плями	10*40 мм для (SR, VR, AR, PR) 15 * 50 мм для HR
Контактна температура охолодження	Макс -10°C
Охолоджувальна система	Вбудоване водяне охолодження + напівпровідникове охолодження + повітряне охолодження
РК-екран	10,4-дюймовий кольоровий сенсорний екран
розмір упаковки	82*59*122 см
вага	99 кг

До і після лікування



Раніше

Після



Раніше

Після



Раніше

Після



Раніше

Після



Раніше

Після



Раніше

Після



TECHNOLAZER

Електронна адреса: Technolazer.shop

