



SHE-MSP003-R

MAGSHAPE PRO

Посібник користувача



Зміст

Розділ 1 Опис машини

1.1 Знайомство з машиною

1.2 Перелік аксесуарів

1.3 Етап встановлення

1.4 Специфікація

Розділ 2 Опис системи

2.1 Принцип роботи

2.2 Застосування

2.3 Перевага

2.4 Інтерфейс

Глава 3 Лікування

3.1 Протипоказання до лікування

3.2 Етапи лікування

3.3 Післяопераційний

3.4 Курс лікування

3.5 Параметри лікування

Розділ 4 Використання Сміркування

4.1 Лікування

4.2 Обслуговування машини

Розділ 1 Опис машини

1.1 Знайомство з машиною



1.2 Перелік аксесуарів

Ім'я	Кількість	одиниця	Ім'я	Кількість	одиниця
Ручка S1	1	ШТ	Силовий кабель	1	ШТ
Ручка S2	1	ШТ	ГВИНТ	4	ШТ
бинт	2	ШТ	гайковий ключ	1	ШТ
Екран	1	ШТ			
					
2 ручка лікування S1&S2			Екран		
					
бинт			Гвинт і гайковий ключ		
					
Силовий кабель					

1.3 Встановлення

Машину слід встановлювати подалі від вентиляційних отворів для гарячого повітря та на

на певній відстані від інших предметів. Щоб переконатися, що температура машини відповідає температурі в приміщенні, вийміть аксесуари машини та помістіть їх у приміщення на 30 хвилин для виконання наступних операцій.

Крок 1: Встановіть РК-екран, як показано на малюнку, підключіть РК-кабель і зафіксуйте його у відповідному положенні.



Крок 2: Встановіть ручку - вирівняйте ручку з розеткою, поверніть і зафіксуйте кнопку у вертикальному положенні, щоб міцно зафіксувати її.



Крок 3: Встановіть кабель живлення



1.4 Специфікація

Електромагнітна хвиля (Енергія)	0-7тесла
Загальна потужність	3000 Вт
РЧ потужність	120 Вт
Частота	F1:1-10 Гц F2:1-100 Гц
Ширина імпульсу	300 нас
Напруга	AC220V±10% 50Hz AC110V±10% 60Hz
Системний режим	Спортивний режим Щадний режим Професійний режим
Екран	10,4 дюйма
Лікувальна ручка	I-S1、II-S2
Розмір машини	36*52*120 см
Розмір упаковки	54*84*115 см
Вага нетто	63 кг
Вага брутто	96 кг

Розділ 2 Опис системи

2.1 Принцип роботи

Magshape Pro поєднує в собі технології HIEMT і RF 2.

HI-EMT призначений для лікування ожиріння жирним червоним шляхом нервово-м'язової стимуляції та збільшення кровотік. Він використовує неінвазивну високоенергетичну сфокусовану електромагнітну технологію для стимуляції рухових нейронів тіла м'язів через вихід енергії від електромагнітного фізичного поля та спонукають м'язи піддаватися високочастотному супер-супернатягненню. Під час процесу екстремального суперскорочення, тиску м'язові волокна руйнуються і роблять глибоке ремоделювання м'язів, тобто зростання міофібрил (збільшення м'язів) і виробництво нових колагенових ланцюгів і м'язових волокон (гіперплазія м'язів), яка зміцнює м'язи і поліпшує весь ліній. У той час як суперскорочення м'язів споживає багато енергії, викликає розщеплення великої кількості жиру, щоб його спалювати та зменшувати жир. Щоб легко досягти мети нарощування м'язів і спалювання жиру. Водночас м'язи дуже скорочуються, це забезпечує швидкісну циркуляцію лімфатичної крові, сприяє метаболізму та підвищує імунітет.

Радіочастотне (РЧ) тепло може спалювати та руйнувати жирові клітини.

Радіочастотний нагрів готує м'язи до впливу

стрес, подібний до того, що робить розминка перед будь-яким горем
rkout. Він покращує кровопостачання м'язів, тому вони міцно нарощуються
пальцем і швидше.

Він також нагріває шари підшкірного жиру до рівня, що викликає
апоптоз і фізично руйнуються. Коли температура досягне
ch між 42-44°C, жирові клітини розщеплюються і знищуються
потім пошкоджені жирові клітини будуть повільно видалятися організмом
метаболізм природним шляхом, що призводить до постійного видалення жиру
al.

Радіочастотний процес також допомагає зменшити в'ялість шкіри
одночасно підтягуючи шкіру.

2.2 Застосування

Тренуйте м'язи преса, формуйте лінію жилета,
тренувати сідничні м'язи, створювати персикові стегна, формувати
ланцюжок косих м'язів, і формують лінію русалки. Форма
лінія жилета за рахунок удосконалення м'язів живота, які мають
стають пухкими за рахунок прямого м'яза живота. Це особливо підходить
для мам у післяпологовому періоді, які мають збільшений окружність живота

ференції внаслідок роз'єднання прямих м'язів живота та пухкий живіт.

Magshape може викувати ланцюг, щоб зміцнити основний муз м'язи живота, включаючи м'язи великого корея м'яза е (прямокишковий м'яз живота, зовнішній косий м'яз, внутр косий м'яз, поперечний м'яз живота) і сідничний м'яз maximus у малому корієвому м'язі. Основні м'язи можуть захищати хребет, підтримувати стійкість тулуба, підтримувати правильну поставу, покращити здатність до пересування та зменшити ймовірність травми, забезпечити структурну підтримку для все тіло, і створити молоду поставу.

2.3 Перевага

(1) Magshape Pro — це багатофункціональний засіб для корекції тіла та muscle будівельний інструмент. Підходить для схуднення, шейпінгу, гей нарощування м'язів, розчинення жиру, тренування ліній жилетки та підвищення висоти ps.

(2) Особливо ефективний він для сідниць і живота. Він використовує сфокусоване електромагнітне поле високої інтенсивності (HIFEM). технологія для індукування короткочасних сплесків сильних м'язів скорочення, внаслідок чого збільшується щільність м'язів, знижується обсяг. Це єдиний спосіб допомогти жінкам і чоловікам будувати

спалює м'язи та жир, і є першим у світі неінвазивним методом підйому стегон.

(3) За рахунок зменшення абдомінального жиру та одночасно створення м'язової основи під жиром, допомога пацієнтам досягти стрункішого та атлетичного контуру тіла.

(4) При нанесенні на сідниці це може викликати у пацієнта а форма після тренування. Але принцип нагрівання/охолодження – ні використовується, тому немає ризику опіків, шрамів або набряків.

(5) Рекомендований план лікування полягає в виконанні чотирьох 30-мільних лікування протягом двох тижнів. Побачимо найкращі результати п через три місяці та продовжить покращуватися через шість місяців.

(6) Він може зміцнити сідничні м'язи або м'язи живота і спалювати жир, зберігаючи.


2.4 Знайомство з інтерфейсом

Коли машина запускається, вона увійде в перший інтерфейс




Потім увійдіть в інтерфейс вибору режиму роботи, є 3 режими f
або ваш вибір:

СПОРТИВНИЙ РЕЖИМ + ЩАДНИЙ РЕЖИМ + ПРОФЕСІЙНИЙ РЕЖИМ

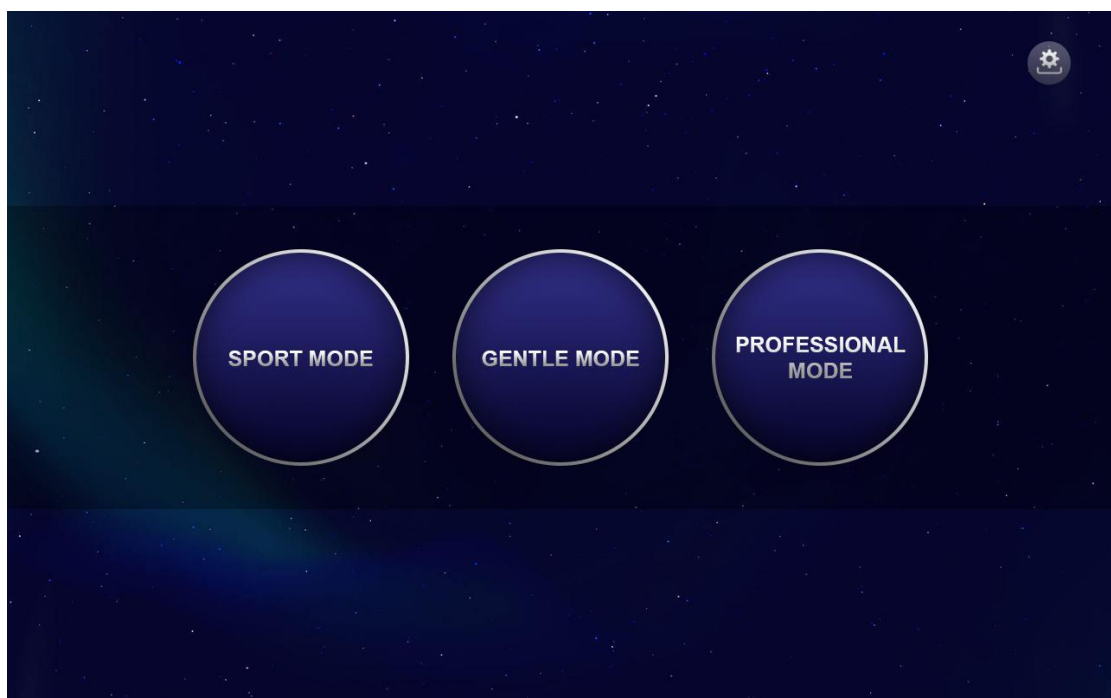


СПОРТИВНИЙ РЕЖИМ

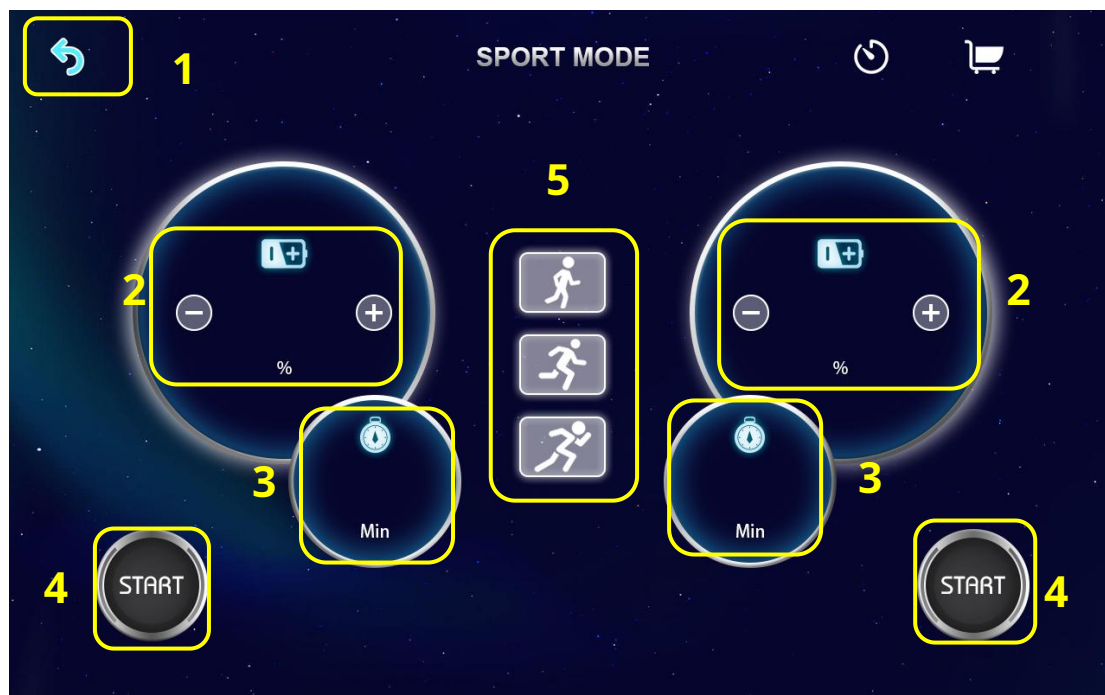


1	Кнопка «Назад», натисніть її та поверніться до попереднього інтерфейсу
2	Fluence, 0-100% регулювання
3	Не регулюється, час відлічуватиметься через 30 хвилин після запуску
4	Кнопка «Пуск»: клацніть піктограму, маркер, щоб почати роботу; натисніть ще раз, ручка перестане працювати
5	Доступні три рівні, інтенсивність поступово збільшується I<II<III

ЩАДНИЙ РЕЖИМ

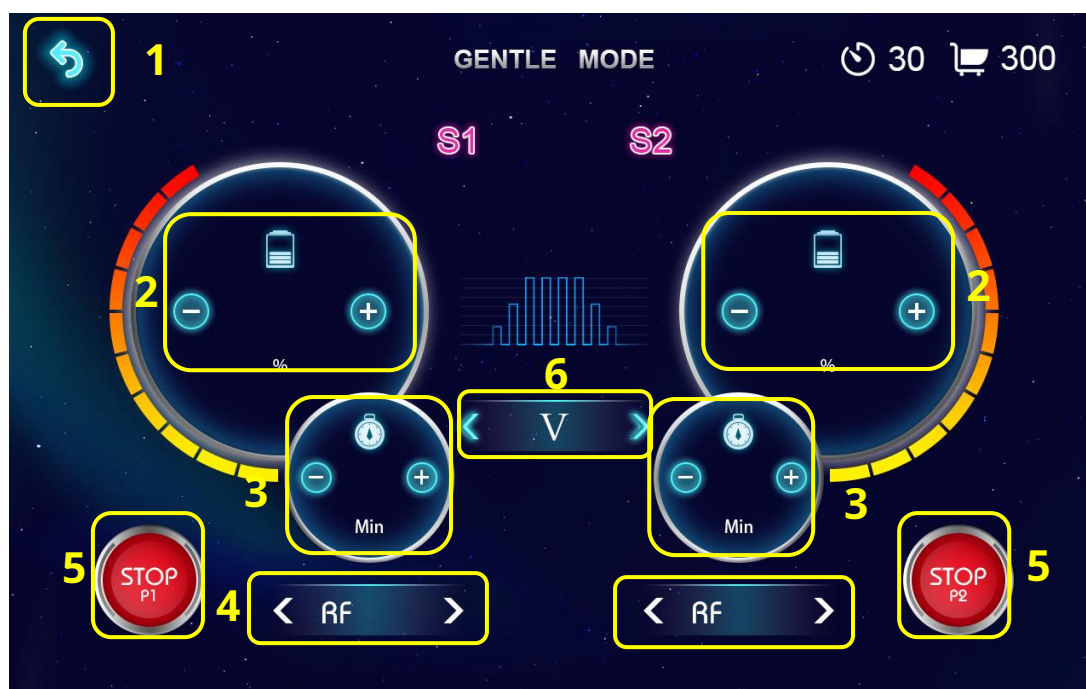

1	Кнопка «Назад», натисніть її та поверніться до попереднього інтерфейсу
2	Fluence, 0-100% регулювання
3	Час роботи, регулюється 5-60 хвилин, за замовчуванням 30 хвилин при завантаженні
4	ВЧ, налаштовані рівні 0-3
5	Кнопка «Пуск»: клацніть піктограму, маркер, щоб почати роботу; натисніть ще раз, ручка перестане працювати
6	Доступні чотири рівні, інтенсивність I-IV поступово збільшився. я<II<III<IV

ПРОФЕСІЙНИЙ РЕЖИМ

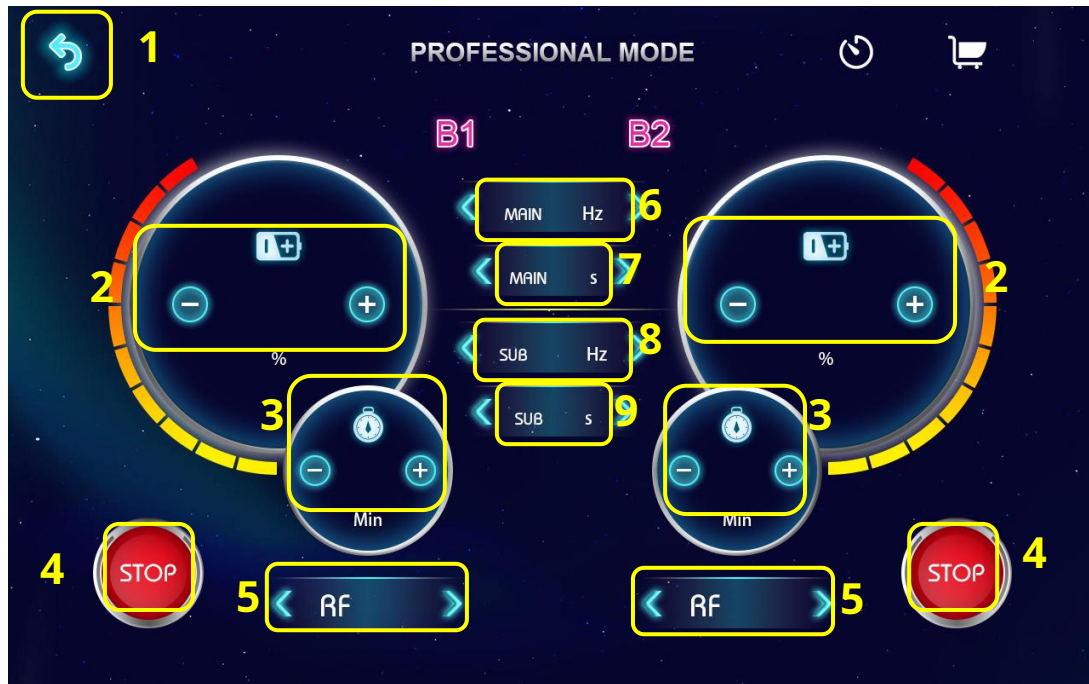

1	Кнопка «Назад», натисніть її та поверніться до попереднього інтерфейсу					
2	Fluence, 0-100% регулювання					
3	Час роботи, регулюється 5-60 хвилин, за замовчуванням 30 хвилин при завантаженні					
4	Кнопка «Пуск»: клацніть піктограму, маркер, щоб почати роботу; натисніть ще раз, ручка перестане працювати					
5	ВЧ, налаштовані рівні 0-3					
6	Основна частота: регульована 1-10 Гц					
7	Основний час: 1-60 с регульований					
8	Субчастота: 1-100 Гц регульована					
9	Допоміжний час: 1-10 с регульований					
Професійний режим: під час роботи він працює циклами відповідно до [Основна частота*Основний час+Підчастота*Підчас] як одиницю, і ручка автоматично припиняє працювати після закінчення часу.						
Коли підчастота >50 Гц, енергія зменшиться						
55-60 Гц: флюенс 0-30% регулюється; 65-70 Гц: флюенс 0-20% регулюється; 75-80 Гц: флюенс: 0-15% регульований; 85-90 Гц: флюенс 0-10% регулюється; 95-100 Гц: флюенс 0-5% регулюється;						
Обмеження налаштування субчастоти та субчасу						
суб-частота	1-30 Гц	31-35 год З	36-40 Гц	41-45 год З	46-50Н З	55-100 Гц
Підчас	1-10S	1-5с	1-4S	1-3S	1-2S	1S

Розділ 3 Лікування

3.1 Лікування протипоказання

(1) Вагітність, лактація, жіноча фізіологія, серце захворювання терпець
nts, гіперліпемія і інший серцево-судинної і цереброваскулярні
ризик групи не може бути лікували

(2) Артеріальний положення не може бути зроблено

(3) Повний живіт можві бутикується, можбутикували 1-2 година с
після а їжа

(4) Пацієнти з імпланти в в тіло не може бутикували

(5) Ті ВООЗнос метал прикраси на їх тіла не може
бутикується (Будь ласка видалити в метал речі)

(6) Наповнювачі в в лікування область не може бути лікували

(7) Яктам є а рана в в лікування сайт, це не може бути trea
Тед

(8) Ті ВООЗмати зазнали хірургія в в лікування сайт
пе-а до чекати в найменше одинрік раніше Вони можбутикували

(9) пацієнт з грижі

(10) Табу частини: голова, груди і назад

3.2 Лікування кроки

(1) Запитуйте В клієнт яктам є протипоказання раніше

лікування ДО забезпечити безпечний лікування

(2) Заборонено операція демонстрація



Під час роботи не можна класти ручку на верстат.

The ручки не може бути разом коли працює, ЯК показано



The ручка не може бути до в голову і груди (серце)

(3) Носити комфортно одяг протягом лікування, ВСЕ метал прикраси повинен бути видалено.



(4) виправити ручку до в лікування сайтз а бинт.

The ручка повинен контакт В шкіри.

(5) старт лікування після коригування В інструмент параметри .

Примітка: Обов'язково зберегти В ручка контакт ОП шкіри протягом лікування



(6) The енергії і частота повинен ні бути ^{перший} великий для лікування до уникати м'яз болючість після лікування.

3.3 Післяопераційний

(1) The м'язи ^{відчувати болить} буде після лікування, котрий є в рефлексія з нормально м'яз вправи

(2) Після лікування, ПИТИ більше вода, їсти ^{клітковина} більше дієта, їсти ^{здоровий} дієта ^{буде} більше ^{фв} метаболізм і ^{прискорити} м'яз відновлення

(3) Уникайте переїдання і збільшення навантаження на організм.

(4) ПИТИ ^{менше} алкоголь і ^{додаток} білок ^{харчові продукти}

3.4 Лікування курс

1. 1 ^{тиждень} робити 1 лікування, 4-6 разів як а лікування курс.

2. 4-6 лікування курси ^а ^{повторний} ^{найкращий} в залежності на в клієнта фізичний хвороба, ^{ожирінням} ^{або} ^{довгий} ^{строк} ^{незаняття фізичними вправами} клієнтів може збільшити в лікування курс.

3. The ^{найкращий} ефект є 2-4 тижнів після лікування. Дещо Люди ^{буде} ^{відчувати} м'язи ^{туго} ^{просто} після обробка

4. Додатковий ^т ^{повторні процедури} в інтервали з 2-3 місяців ^{може} ^{підтримувати} в ^{більшість} підтримується ефект ^т

3.5.1 Розрахунок відсотка жиру в організмі

Стать	Розрахунок відсотка жиру в організмі формула
Жінка	$A = \text{обхват талії} \times 0,74$ $V = \text{вага} \times 0,082 + 34,89$ Загальна маса жиру в організмі $C = AB$ Відсоток жиру в організмі $D = (C \div \text{вага}) \times 100\%$
Чоловік	$A = \text{обхват талії} \times 0,74$ $V = \text{вага} \times 0,082 + 44,74$ Загальна маса жиру в організмі $C = AB$

	Відсоток жиру в організмі $D=(C\div\text{вага})\times 100\%$
--	--

3.5.2 Стандарт рівня жиру в організмі

Статура	Відсоток жиру в організмі чоловіка	Відсоток жиру в організмі жінки
Тонкий	5-10%	5-20%
стандарт	11-21%	21-34%
надмірна вага	22-26%	35-39%
ожиріння	27-45%	40-45%

3.5.3 Параметр лікування

ПРОФЕСІЙНИЙ РЕЖИМ (більше підходить для кваліфікованого оператора)				
ЖІНКА				
Робочий час		30 хв		
Підшкірний жир	5-20%	21-34%	35-39%	40-45%
ВІДСОТОК	тонкий	стандарт	надмірна вага	ожиріння
Основна частота	2~5	3~5	4~6	5~7
Основний час	2~6	3~7	4~8	4~10
Флюенс	30%-50%	40%-60%	40%-70%	50%-80%
Підчастота	20-30	30-35	35-40	40-50
Підчас	3~10	5~10	1~4	1~2
РФ	1	2	2	3
людина				
Робочий час		30 хв		
Підшкірний жир	5-10%	11-21%	22-26%	27-45%
ВІДСОТОК	тонкий	стандарт	надмірна вага	ожиріння

Основна частота	2~5	3~5	4~6	5~7
Основний час	2~6	3~7	4~8	4~10
Флюенс	40%-60%	40%-70%	50%-80%	60%-90%
Підчастота	20-30	30-35	35-40	45-50
Підчас	3~10	5~10	1~4	1~2
РФ	1	2	2	3

ПРОФЕСІЙНИЙ РЕЖИМ (при використанні подушки для тазового дна)				
ЖІНКА				
Робочий час		30 хв		
Підшкірний жир	5-20%	21-34%	35-39%	40-45%
ВІДСОТОК	тонкий	стандарт	надмірна вага	ожиріння
Основна частота	3~10	5~10	5~10	1~5
Основний час	1~3	1~2	1~2	1~2
Флюенс	20%-35%	30%-45%	35%-55%	45%-65%
Підчастота	20-30	30-35	35-40	40-50
Підчас	2~8	2~5	2~4	2~4
людина				
Робочий час		30 хв		
Підшкірний жир	5-10%	11-21%	22-26%	27-45%
ВІДСОТОК	тонкий	стандарт	надмірна вага	ожиріння
Основна частота	3~10	5~10	5~10	1~5

Основний час	1~3	1~2	1~2	1~2
Флюенс	25%-40%	35%-50%	40%-60%	50%-70%
Підчастота	20-30	30-35	35-40	45-50
Підчас	2~8	2~5	2~4	2~4

Примітка:

Параметр обробки слід регулювати відповідно до толерантності клієнта. Після лікування деякий час або після кількох процедур клієнт буде адапт він може відповідно регулювати вищу енергію.

Для першого лікування клієнта ми пропонуємо тестування з меншою енергією.

ЩАДНИЙ РЕЖИМ

(Більше підходить для людей, які мало займаються спортом)

Робочий час		30 хв			
		Статура	Флюенс - Жінка	Флюенс - Людина	РФ
рівень	I	Сухий тип статури	30%-50%	40%-60%	1
	II	Стандартний тип кузова	40%-60%	40%-70%	2
	III	Тип статури із зайвою вагою	40%-70%	50%-80%	2
	IV	Вгодований тип статури	50%-80%	60%-90%	3

Примітка:

Вибір рівня пов'язаний з доступністю клієнта

Примітка:

(1) Рівень жиру в організмі є середнім вмістом жиру в організмі в цілому та треа
Для окремих частин, тому остаточний параметр слід скорегувати
відповідно до відчуття клієнта. Для кращого результату використовуйте клієнтські

максимальний параметр витривалості.

(2) М'язи людей, які регулярно займаються спортом, часто розтягуються, тому вони може витримувати вищу терапевтичну енергію та частоту. У повних людей є товстіший жир і процес провідності будуть вплинути, тому вони також можуть витримувати більш високу енергію. Рекомендовані параметри лише для довідки. Нарешті параметри повинні бути скориговані відповідно до замовника

Толерантність.

(3) Під час лікування м'язи можуть стати толерантними через десять хвилин, і в цей час енергію можна збільшити.

(4) За такого самого впливу люди з більшою кількістю м'язів мають відносно більші м'язові скорочення та вібрації під час лікування.

СПОРТИВНИЙ РЕЖИМ

(підходить для пробудження м'язів перед високоінтенсивними тренуваннями, або розслабте м'язи після тренування)

Робочий час		30 хв		
		Статура	Флюенс-Жінка	Fluence-Man
вправи інтенсивність	I	Сухий тип статури	50%-70%	60%-80%
		Стандартний тип кузова	60%-80%	70%-90%
	II	Тип статури із зайвою вагою	50%-80%	60%-90%
	III	Вгодований тип статури	60%-90%	60%-100%
Примітка:		Вибір моделі залежить від доступності клієнта		
Примітка:				
(1) Рівень жиру в організмі – це середній вміст жиру в організмі та лікування				

ent для окремих частин, тому остаточний параметр слід скорегувати відповідно до відчуття клієнта. Для кращого результату використовуйте клієнтські максимальний параметр витривалості.

(2) М'язи людей, які регулярно займаються спортом, часто розтягуються, тому вони са п витримувати вищу терапевтичну енергію та частоту. У повних людей є товстіший жир і процес провідності будуть вплинути, тому вони також можуть витримувати більш високу енергію. Рекомендовані параметри лише для довідки. Нарешті параметри повинні бути скориговані відповідно до замовника терпимість.

(3) Люди з більшою кількістю м'язів при однаковій енергії мають відносно більшу мускулатуру тремтіння під час лікування.

Розділ 4 Використання **Сміркування**

4.1 Лікування

1. Людям із зайвою жирністю рекомендують вживати ін жиророзчинні інструменти разом.
2. Не переїдайте, почекайте принаймні півгодини після їжі лікування.
3. Вагітність у жінок, період годування груддю та менструальний цикл заборонені; не рекомендується це робити під час менструація, що може спричинити надмірну менструацію.
4. Після лікування може з'явитися біль, що є нормальним явищем. The больова реакція стихає природним шляхом протягом 1-3 днів.
5. Під час лікування не носіть жодних металевих предметів.
6. Під час лікування не можна використовувати електронні вироби.

Високочастотні магнітні поля можуть легко пошкодити електроніку продуктів.

4.2 Обслуговування машини

1. Встановіть дві ручки перед початком роботи
2. Відносно тестування двох ручок заборонено
3. Запобігайте втраті, після встановлення ручки зніміть пластиковий спіральний ключ і добре зберігайте його.



4. Примітка: Якщо тазового поверх ручки або рука/нога ручки, повинен
Тримайте РФ «0» (оскільки тазового поверх або рука/нога ручки мати немає
РФ функція). Інакше якщо використовувати РФ, РФ потужність постачання може бути
пошкоджений.

