

Інструкція для інструменту терапії EMS

C001-1



Каталог

Глава 1 Інформація про користувачі 1.....	1
1. 1 Заходи безпеки 1.....	1
1.2 Навчання користувачів 1.....	1
1.3 Електрична та механічна безпека обладнання 1.....	1
Глава 2 Вступ з продуктом 2.....	2
2. 1 Огляд продукту 2.....	2
2.2 Структура та продуктивність продукту 3.....	3
2.2.1 Склад структури обладнання 3.....	3
2.2.1.2 Інструкції для магнітного контролера обличчя 5.....	5
2.3 Діапазон обробки обладнання 7.....	7
2.4 Аксесуари продукту 7.....	7
Глава 3 Монтаж обладнання 9.....	9
3.1 Процес встановлення 9.....	9
Глава 4 Інструкції з експлуатації програмного.....	10
4. 1 Операційний інтерфейс 10.....	10
4.1.1 Опис робочого інтерфейсу EMS 10.....	10
4.1.2 Додавання нових користувачів та отримання історії лікування 11	11
4.1.3 Отримання існуючих користувачів та історії лікування.....	12
4.1.4 Опис інтерфейсу магнітного роботи обличчя 13.....	13
4.1.5 Опис масштаби жиру тіла та відображення інтерфейсу 13.....	13
4.1.6 Опис робочого інтерфейсу EMS 14.....	14
4.2 Процедур роботи пристрою 16.....	16

4.3 Опис магнітного робочого інтерфейсу 17.....	17
4.4 Клінічне використання ручника для лікування EMS 17....	17
4.5 Протипоказання та заходи 18.....	18
Глава 5 Обслуговування обладнання 19.....	19
5.1 Очищення основного блоку 19.....	19
5.2 Очищення ручних частин обробки 19.....	19
5.3 Обробка несправностей системи 19.....	19
Глава 6 Специфікації 20.....	20
Рекомендація параметрів клінічного використання (штучний).....	21
Рекомендація параметрів клінічного використання (.....	24

Глава 1 Інформація про користувач

Перед використанням оператор повинен детально прочитати посібник користувача та перевірити, чи працюють всі функції обладнання належним чином, щоб уникнути

1.1 Заходи безпеки

Коли системний процесор запускається, процесор виконує самотестування, а процесор продовжує і нерегулярно проводить самотестування під час процесу обробки.

У випадку надзвичайного випадку, будь ласка, відключи живлення, щоб вимкнути обладнання.

Примітка: лише персонал, навчаний дистриб'ютором, має уповноваження підтримувати внутрішні Будь-яка несанкційна обробка може завдати шкоди інструменту та скасувати

1.2 Підготовка користувачів

Не їжте після лікування, принаймні одну годину після їжі. Не носити жодних металевих предметів на тілі пацієнта і не розміщувати жодних електронних виробів або металевих предметів на Переконайтеся, що робочі частини та зонд були сухі та вологими. Енергія роботи відрізняється від людини до людини, і поступово зростає від низької енергії.

1.3 Електрична та механічна безпека

Джерело живлення, використовується обладнанням, є однофазним живленням 200V ~ 240V (50/60 Гц), міжнародний стандарт (120сV ~ 260V, 50/60 Гц); 10А (90~ 130В, 50/60 Гц) однофазна трилінійна розетка.

Обладнання підключено до землі через трьох дротів, і заземлення повинна бути надійним. Тільки уповноважений персонал може ремонтувати обладнання, інакше гарантія не буде дійсним.

Примітка: уникнути використання запалючих предметів, таких як ацетон та алкоголь, у межах робочого При дезинфекції обладнання з алкогольним продуктом, переконайтеся, що алкоголь повністю випарується

Глава 2 Вступ з продукту

2.1 Огляд продукту


Він використовує найпередовішою технологію високої інтенсивності фокусованої магнітної енергії (HIFEM) для безпосереднього стимулювання двигунів нейронів, що дозволяє вашим м'язам постійно протягом 30-хвилинної сесії енергійні імпульси можуть викликати до 30 000 потужних м'язових скорочень Ця технологія прискорює метаболізм жирних клітин і сприяє інтенсивному розпаді, підносячи зміцнюючи м'язи, надаючи

Принцип роботи: Використовуючи технологію неінвазивної високої інтенсивності фокусованої електромагнітної енергії (HIFEM), цей пристрій надає високочастотну електромагнітну енергію через великий Він викликає безперервне скорочення та розширення м'язових м'язових, створюючи тренування високочастотної стійкості, який змінює м'язовий волокна для росту (гіпертрофії м'язових), Цей процес підвищує щільність м'язів та об'єм.

100% максимальне скорочення м'язових м'язових, дозволене HIFEM, викликає значний розпад жиру, вивільняючи жирні кислоти з тригліцеридів, які Підвищення концентрації жирних кислоти викликає апоптоз жирних клітин, який організм природно Тому магнітне формування тіла ефективно посилює м'язи, досягнувши зменшення жиру.



2.2 Структура та продуктивність продукту

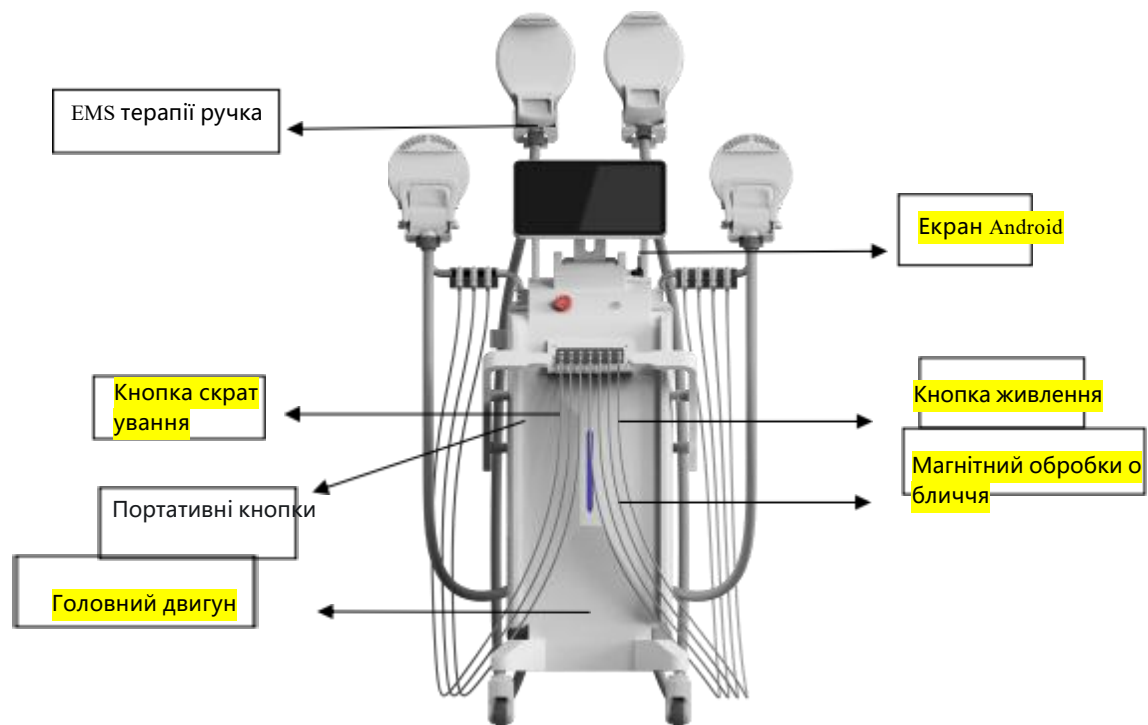

Зображення 2-2-1

Як показано на малюнку 2-2-1, система EMS в основному складається з блоку хоста, модуля керування та терапевтичного ручки. Модуль керування включає перемикач живлення та 13,3-дюймовий сенсорний екран Android. Голова лікування має високоінтенсивну фокусовану магнітно-резонансну терапію в поєднанні з технологією магнітної терапії обличчя.

2.2. 1. Склад структури обладнання

2. 2. 1 Хостові

Для пристрою хост є зовнішнім виглядом цілого, він також є носієм інших компонентів продукту. EMS хост, як правило, складається з наступних частин:

Модуль живлення: живлення для всієї системи обладнання є джерелом живлення обладнання.

Модуль керування: як центр керування обладнанням, вихідне обладнання керування вихідним обладнанням для досягнення проектування різних функцій для досягнення потреб користувача.

Модуль відображення: як інтерфейс взаємодії людини та комп'ютера, відображає різну інформацію системи та приймає

2.2.1.2 Панель керування


Експлуатація EMS в основному завершується через модуль керування, який в основному

Вмикач живлення: запустити пристрій і підключити пристрій до живлення.

Control screen: as the human-machine interface, display the operation Settings and adjust the system parameters.

2.2.1.3 Ручка обробки EMS

Лікування ручка є основним предметом реалізації операції, включаючи зав'язок та голову лікування. Повторки оснащені кабелями живлення та кабелями даних всередині, а голова обробки показано на малюнку 2-2-2.

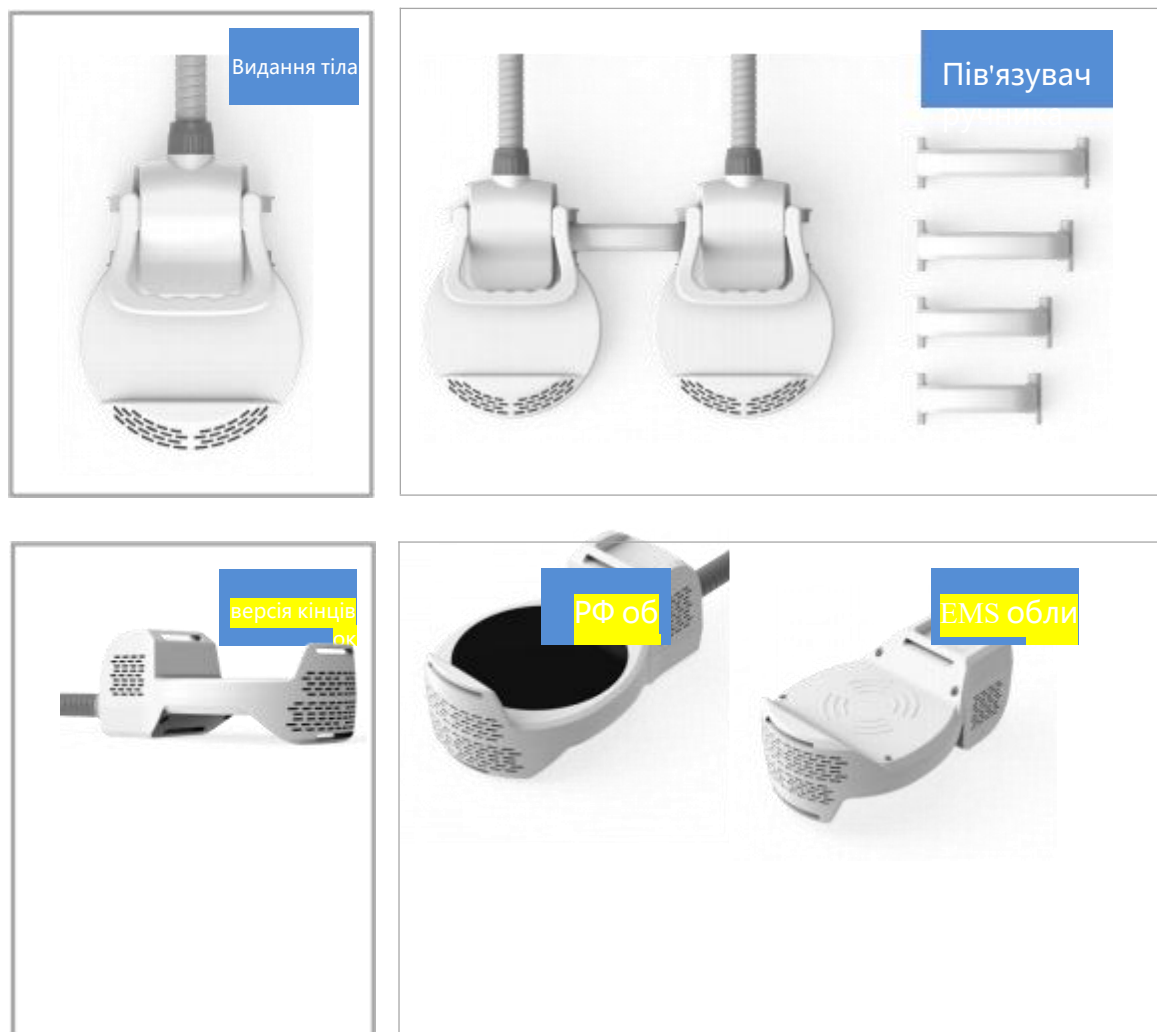

Зображення 2-2-2

2.2.1.4 Магнітний ручник обробки обличчя

Оброблений ручник служить як основний операційний компонент, включаючи сканер, навігаційний кабель та магнітні витратні матеріали. Як показується на малюнку 2-2-3, витратні матеріали магнітного патку обличчя показані на малюнку 2-2-4.



Зображення 2-2-3 Зображення 2-2-4




Зображення 2-2-3 Зображення 2-2-4

2.2.1.5 Інструкції для магнітного контролера обличчя

Магнітний патч обличчя включає в себе п'ять частин: лоб, щока, ока, підборіддя та задню шиї, а також існує 7 видів паток, як показано на малюнку 2-2-5.

При обробці використовуючи магнітну ручку обличчя, вставте кінець картки витрачної частини в ідентифікаційну картку Vosib може автоматично ідентифікувати тип магнітної частини. Під час роботи магнітна голова може бути прикреплена до вказаної частини.

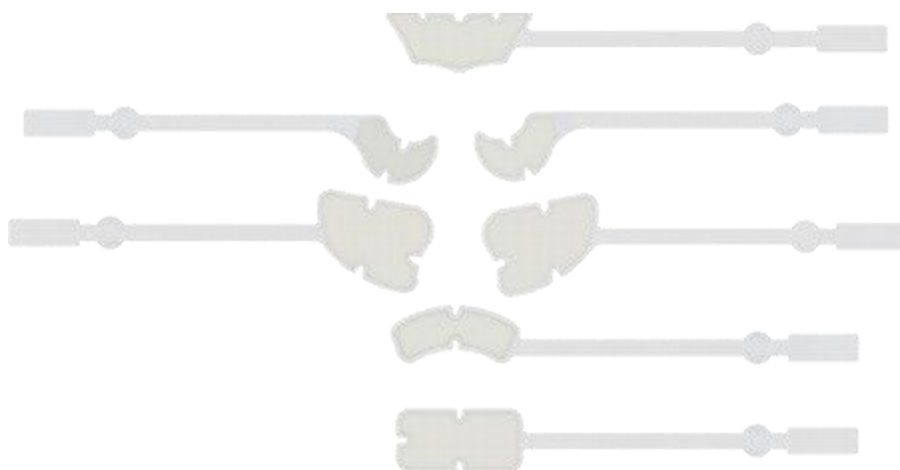

Зображення 2-2-5

2.2.2 Параметри продуктивності продукту

2-2-2-1, таблиця параметрів продуктивності продукту

Функція	Параметр
Робоча напруга	220V/110V
Загальна потужність	4500W
Радіочастота	5м
Частота вихідної частини	5- 100 Гц
Ширина імпульсу	250us
Номинальна потужність	2500W
Система охолодження	охолодження повітря
Інтерфейс роботи	13-дюймова система керування Android
Загальна вага	55 кг
Розмір приладу	44см * 50см * 115см
Розмір коробки упаковки	50см * 60см * 123см
Вага	72 кг

Таблиця параметрів продуктивності ручника EMS 2-2-2-2

Функція	Ручка кінцівок	Ручка тіла
Діаметр дроту	130 мм	130 мм

Кількість поворотів	21 Радіус	21 Радіус
Товщина дроту	15 мм	15 мм
Значення індуктивності	27uh-30uh	27uh-30uh
Піковий струм точки	1800A	1800A
Пікова напруга точки	1400V	1400V
Режим вихідного вихідного	Двосторонній OU-TPUT	Один вихід
Режим вихідного вихідного	Імпульс	Імпульс
Частота	5- 100 Гц	5- 100 Гц
Вага ручки	1, 5 кг	1, 5 кг
Довжина ручки	2 м	2 м

2-2-2-3 Таблица параметрів продуктивності магнітної ручки

Мікрострум Основна частота	2000/ 3000/ 4000 Гц
Мікрострум Пікова напруга	35VDC
Мікрострум Піковий струм	200 мА (імпеданс 200 Ω)
Радіочастоту	1м

Радіочастотна потужність	10W
Довжина ручки	1, 5 м

2.3 Сфера терапії пристрою

1. Діапазон обробки EMS

В основному використовується для формування тіла та

Використовуючи неінвазивну високоенергетичну технологію концентрації електромагнітних хвиль, стимулюючи двигуні нейрони м'язів тіла через вихід енергії електромагнітного поля, що викликає високочастотні та Під час крайнього та надзвичайно сильного процесу скорочення м'язових волокна розламуються, що дозволяє глибокого реконструкції м'язів, а саме зростання міофібрил (збільшення м'язів) та виробництва нових колагенних ланцюжок та м'язових волокна (гіпертрофія м'язових), що підвищує гладкість У той же час надзвичайно сильні м'язові скорочення споживають велику кількість енергії, викликаючи розпад багатьох жирів, тим самим спалюючи та зменшуючи жиру. Таким чином, він може легко досягти мети створення м'язів, втрати жиру, формування тіла та підвищення фітнесу. У той же час надзвичайно сильні м'язові скорочення також призводять швидке циркуляцію лімфатичної та крові, сприяючи метаболізму та підвищуючи імунитет.

2. Діапазон обробки магнітного обличчя

1. Краса та догляд за шкірою

Стимулюючи крові циркуляції обличчя невеликим струмом, вона полегшує втому, покращує тонкість шкіри та еластичність, а також може відігравати роль у антистарінні та відновленні

2. Магнітна чутливість

Використовуючи електромагнітне прискорення метаболізму та спалювання жиру, особливо підходить Без операції або заповнення ін'єкції, зменшує ризик побічних ефектів через поглинання енергії електромагнітних

3. Психічна та фізична навчання

Дизайн патча підвищує стійкість м'язових, підвищує точність контролю тіла та забезпечує глибоку клінічну перевагу проти старіння У поєднанні з радіочастотною теплотерапією, вона покращує якість сну, балансує нервової системи та посилює

2.4 Аксесуари для продукту

Аксесуари для продукту EMS показані в таблиці 2-4-1

Таблица 2-4-1 Список аксесуарів продуктів EMS

Назва аксесуару	Кількість
Посіб встановлення	1 книга
Оброблення ручки (з монтажним кронштейном)	4 ножи
Інструмент ідентифікації	7 шматок
Шунок живлення	1 корінь
Шази	3 шматки
Портативна аварійна зупинка	1 шматок 1 набір

Скала жиру тіла	5 комплектів. Кожен набір містить 7 штуків.
Набір магнітних плиток шестикутного клавіша	1 шматок
Вітрут з хрестною головою	5 шматків
Декоративна подложка	100 шматок
Одноразові ручні ізоляційні тканини	1 корінь
Шунок живлення	3 шматки


Глава 3 Встановлення обладнання

3.1 Процес встановлення

Обладнання повинно бути встановлено в середовищі, що не від корозійних газів, з мінімальним пилом та Корозійні гази можуть пошкодити електронні та механічні компоненти, а також Надмірний пил або частинки в повітрі може завдяки шкодженню фільтрів та електричних Температура та вологості встановлення середовища повинні відповідати вимогам продуктивності обладнання.

Етапи встановлення:


- Розпакуйте обладнання.
- Розпакований обладнання розміщується на місці протягом один день, щоб уникнути надмірної вологості, викликаного транспортуванням на
- Після стабілізації вологості, зберте всі компоненти обладнання, забезпечайте безпечно всі з'єднання.
- Після завершення збірки та з'єднання живлення та забезпечення належного підключення все, перемикається пристрій та перевірте його продуктивність

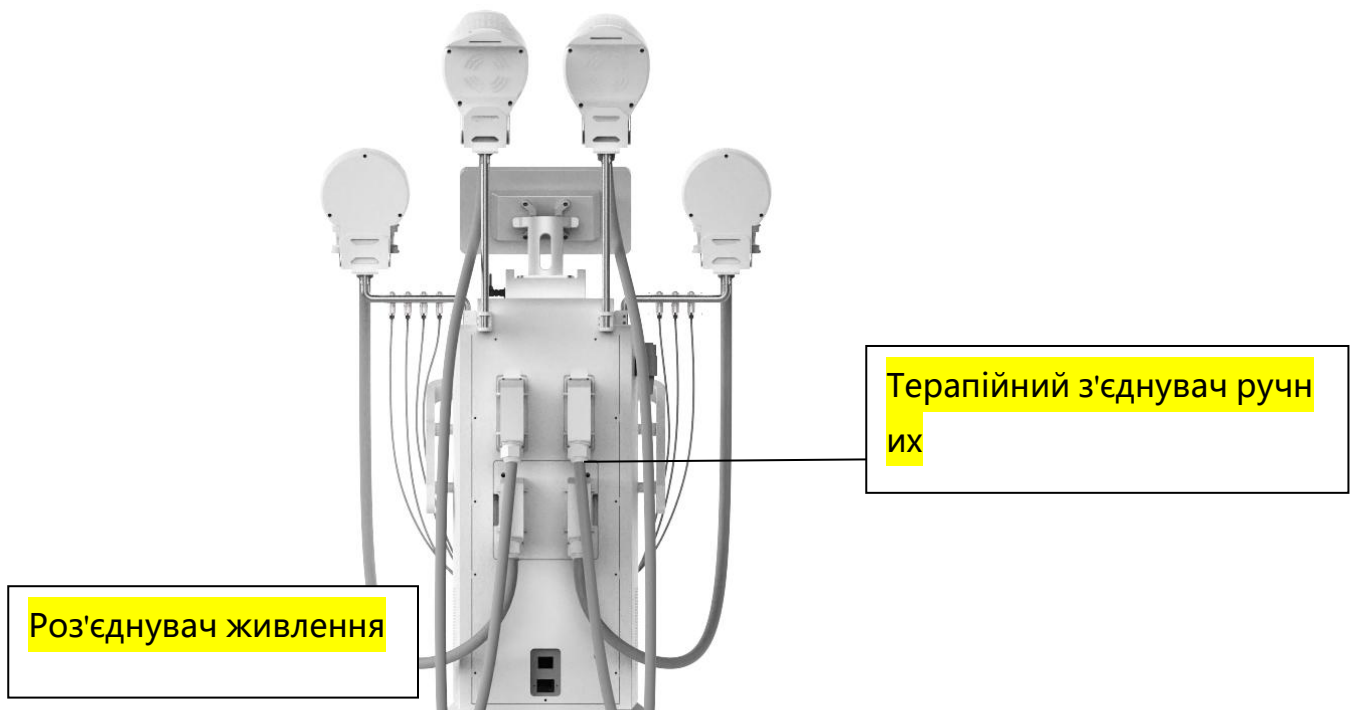


Глава 4 Інструкції з експлуатації програмного

4.1 Операційний інтерфейс


4.1.1 Опис робочого інтерфейсу EMS

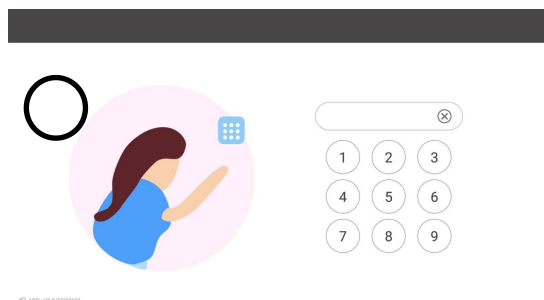


Інтерфейс входу

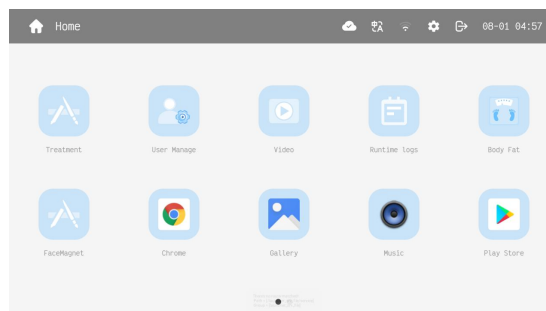


Інтерфейс вибору програм

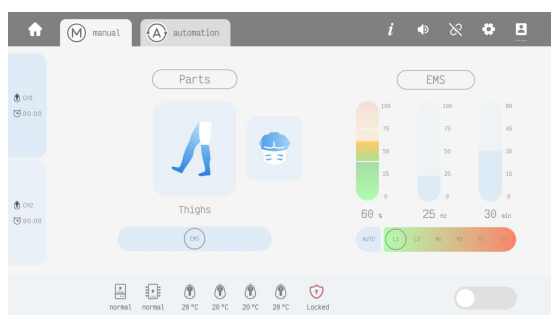


Головний інтерфейс ручний

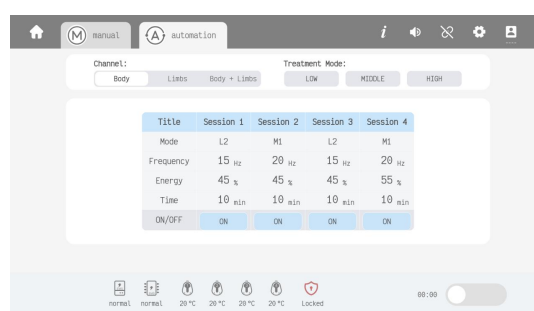


Головний інтерфейс режиму програм

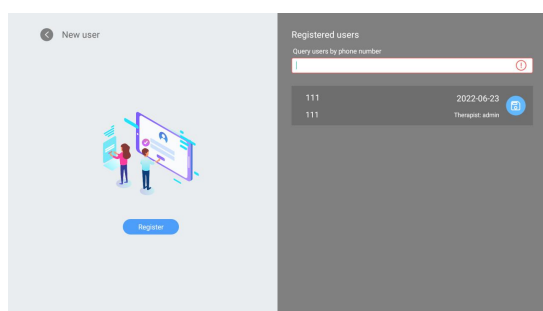


Інтерфейс пошуку клієнта

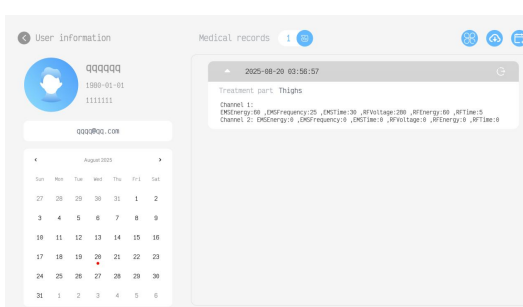


Інтерфейс історії обробки

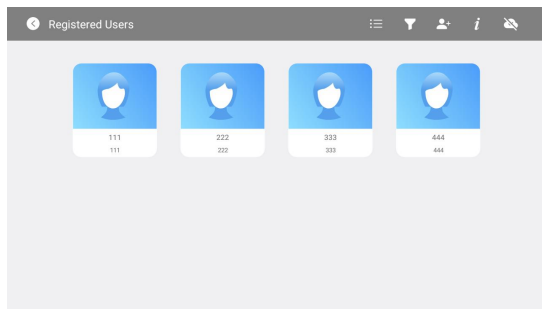

Стиль списку користувачів

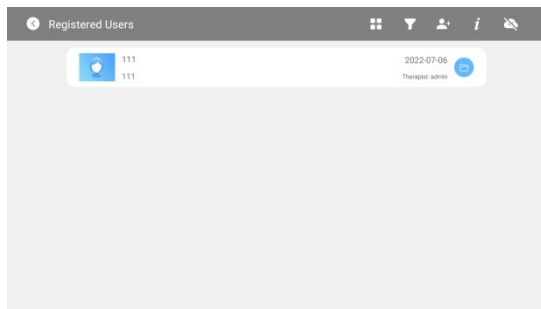

Стиль списку кори

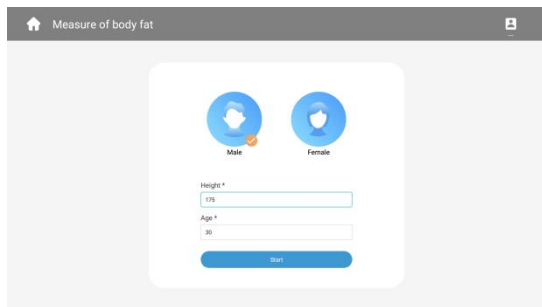


Інтерфейс інформації користувача




Інтерфейс моніторингу здоров'я


4.1.2 Додавання нових користувачів та отримання історії

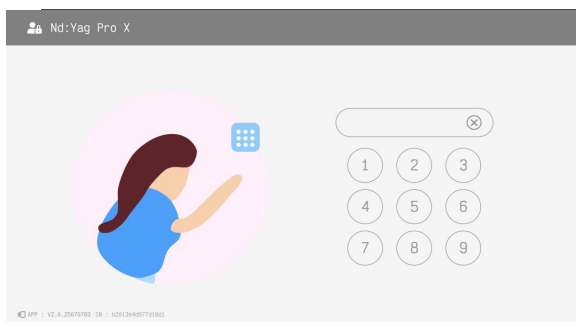


1. Інтерфейс входу користувача

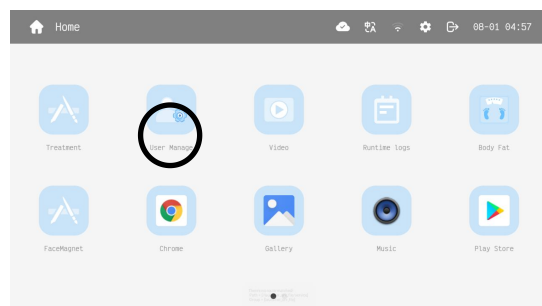


2. Інтерфейс вибору програми

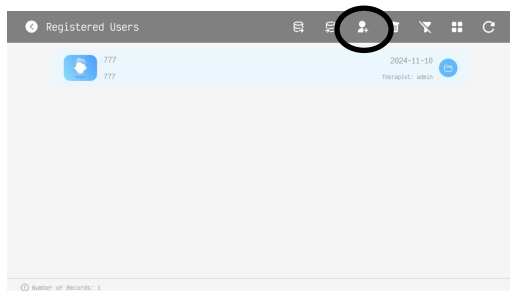

3. Новий користувачий інте
рфейс

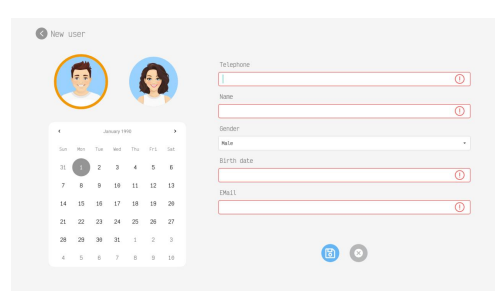


4. Інтерфейс введення інформації

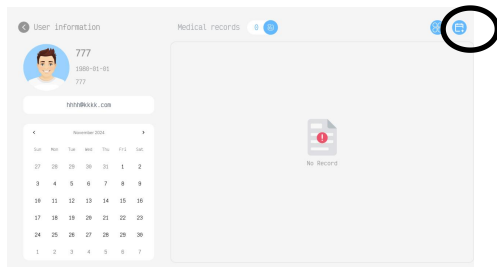


5. Повернутися до інтерфейсу обробки


4.1.3 Отримання існуючих користувачів та історії

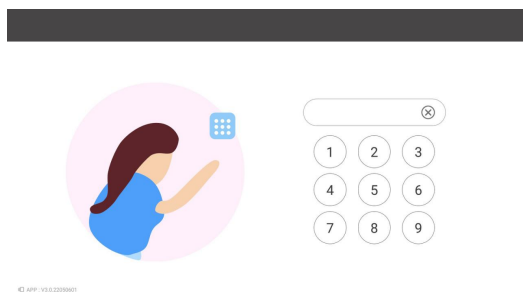


1. Інтерфейс входу користувача

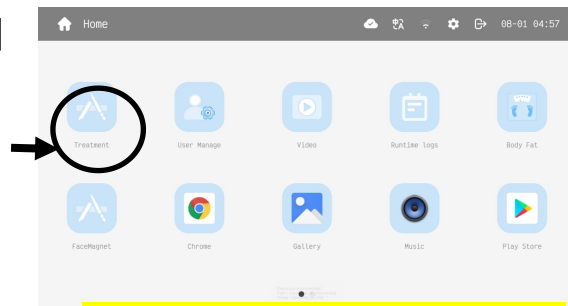


2. Інтерфейс вибору програми

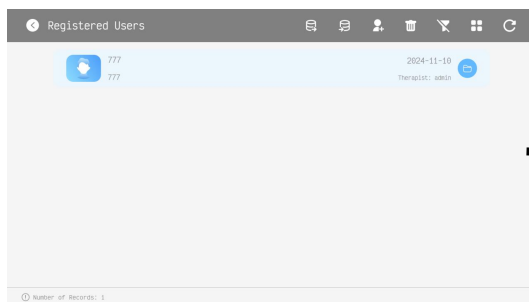

3. Інтерфейс пошуку

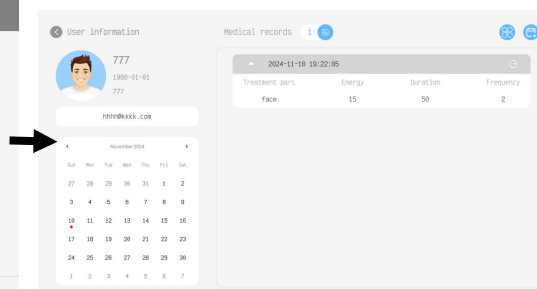


4. Повернутися до інтерфейсу обробки

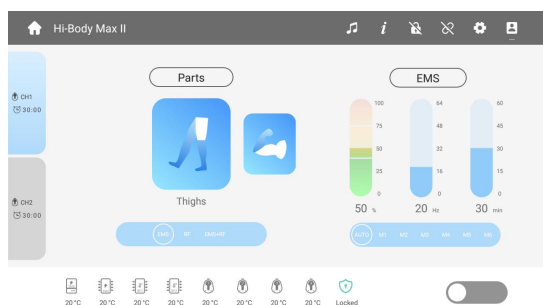

5. Головна сторінка

4.1.4 Опис магнітного інтерфейсу роботи обличчя

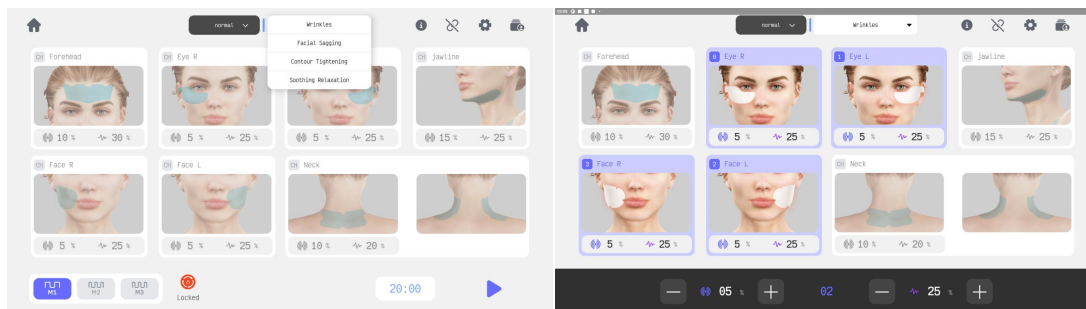

Основний інтерфейс роботи магнітного магнітного головного
Основний інтерфейс роботи магнітного магнітного головного

4.1.5 Опис масштаби жиру тіла та відображення


➤ Опис масштаби жиру тіла

- 1. Розміри: 320 × 320 × 23 мм; Чиста вага: 2 кг; Температура роботи: 5°C-40°C; Джерело живлення: 4×AAA батареї.
- 2. Діапазон ваги: 5 кг-150 кг; З'єднання: Bluetooth 4.0 або вище; Сумісні пристрої: Android 4.4 або вище.
- 3. Діапазон частоти: 2400 МГц-2483 МГц; Віковий діапазон тестування: 7-99 років.
- 4. Основні дані про фітнес та втрату ваги: маса жиру, м'язова маса, ІТМ, вага тіла, відсоткова жиру тіла, білка тощо.
- Дані моніторингу здоров'я: вміст води, кісткова маса, скелетних м'язів, контроль ваги, рівень ожиріння, форма тіла, вік тіла, оцінки

здоров'я, контроль жиру, контроль м'язів, нестра маса тіла, базовий швидкість метаболізму, індекс




➤ Відображення інтерфейсу роботи

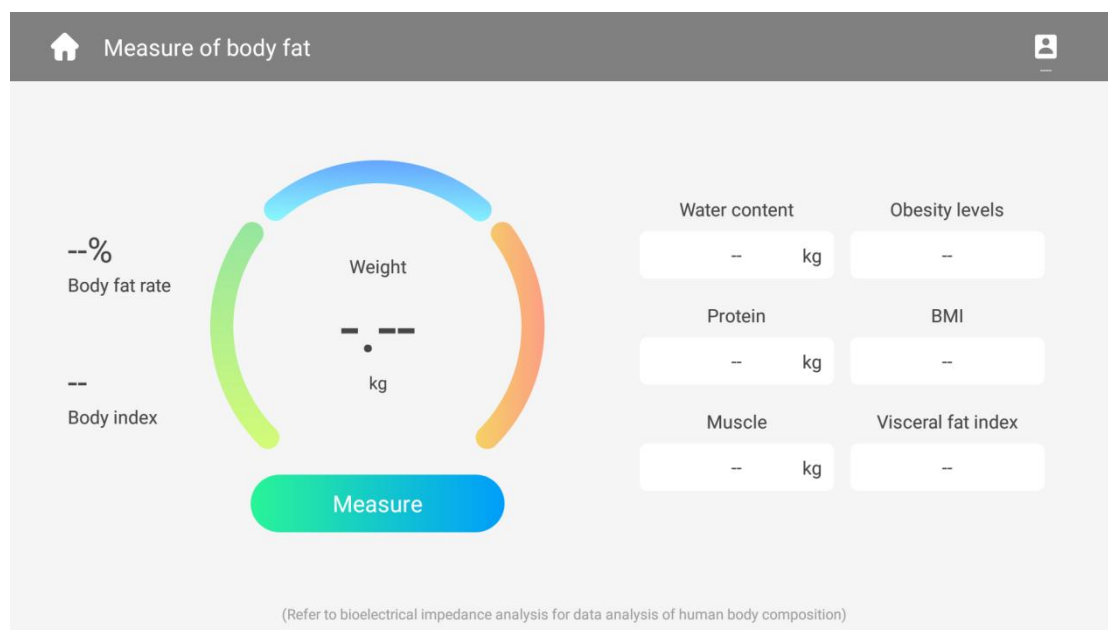

4.1.6 Опис робочого інтерфейсу EMS

Таблиця 4-1-1 Опис робочого інтерфейсу

Піктограма		Назва	Функція
		Вибір ручника	Клакните, щоб вибрати руко

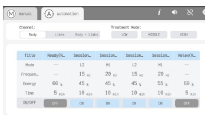Користувач			вий штук P1/P2
		Вибір ручника	Клакните, щоб вибрати руко вий штук P3/P4
		Комбінація пара метрів лікування	Параметри частоти/енергії/ч асу
		Вибір	Клакните, щоб вибрати лікув ання
		Вибір живота	Клакните, щоб вибрати лікув ання живота
Параметри			

Ключ		Вибір рук	Клакните, щоб вибрати обробку руку
		Вибір стегна	Клакните, щоб вибрати лікування стегна
		Вибір тельки	Клакните, щоб вибрати лікування телями
		Почати/зупинити вибір	Натисніть, щоб запустити/зупинити
		Вибір параметри тіла	Докладніть, щоб ввести інтерфейс


4.2 Процедур роботи пристрою

- Перед лікуванням оператор детально спілкується з клієнтом, щоб підтвердити, що клієнт відповідає вимогам протипоказання і не носить жодних

- Використовуйте ремінь, щоб встановити ручку на області, яку обробляється, запустити систему та ввести інтерфейс параметрів обробки;

- Натисніть , коли  підсвітлюється, щоб вибрати відповідну область



,  після    вибору натисніть кнопку , і ручник введе робочий стан. Параметри обробки автоматично генеруються від

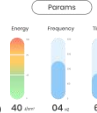повідно до вибраної області та можуть  бути вручну налаштовані відповідно до

- Можна  працювати одночасно або індивідуально, а енергія обробки може бути
- Система забезпечує 6 виборних режимів, які можна вибрати та перемикає відповідно до потреб клієнта, підходячи для першого користувачів. Автоматичний режим налаштує лікування від ніжного до інтенсивного протягом одного сеансу відповідно до часу лікування, режиму, частоти та енергії, підходить для


4.3 Опис магнітного робочого інтерфейсу

Опис робочого інтерфейсу таблиці 4-4-1

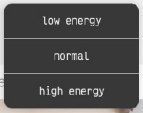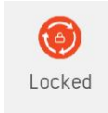Піктограма		Назва	Функція
Користувач Параметри/ Ключ операції		Ключка параметри/ операція	
		Вибір рівня енергії Вибір симптомів	
		Регулювання енергії радиочастотного	0-100%
		Регулювання мікроструму	0-100%
		Вибір інтенсивності	M1/ M2/ M3
		Вибір часу	0- 60 хвилин
		Почати/зупинити вибір	Натисніть, щоб запустити/зупинити
			Паузу/ Увімкнути

4.4 Клінічне використання ручних шматок лікування

- 1. Одноразові захисні плівки медичного рівня: шкірка, ефективний захист.
- 2. Тільки одноразово використання: гарантує, що енергія RF не злаблюється під
- Служить як ізоляційний шаром між ручником та шкірою, чистий та гігіє

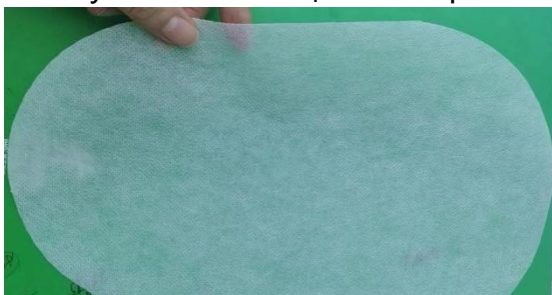

4.5 Протипоказання та заходи

- Не діють поблизу голови, шиї/сонної артерії, публічної області або області поблизу грудної порожнини.
- Дві ручки не повинні стикати один одного під час роботи.
- Пацієнт не повинен носити жодних металевих предметів.
- Пацієнт не повинен бути на повному шлунку під час лікування; Лікування повинно проводитися принаймні одну годину після їжі.
- Область обробки та зонд обробки повинні бути сухі та вільними вологості.
- Рівень енергії відрізняється залежно від особи Почніть з низького рівня енергії та поступово підвищувати рівень
- Загальний денний час лікування не повинен перевищувати одну з половиною години, а лікування на будь-якій області не повинен перевищувати
- Під час процедури не повинен розміщувати на приладі жодних електр

онних пристроїв або

- Під час процедури не повинен споживати їжу чи воду.
- Зачекайте принаймні одну годину після процедурами, перш ніж їсти (пийте багато води та їжте високобілкові продукти)
- Лікування не повинно проводитися для осіб з такими умовами:

▲ Уникайте використання цього продукту під час менструації, вагітності або лактації

▲ Використовуйте обережно у пацієнтів з серцевими захворюваннями, гіпертонією, проблемами щитовидної залози, злоякісними пухлинами, нирковою недостатністю, епілепсією або

▲ Використовуйте обережно у пацієнтів з металевими або електронними імплантатами (такими як металевий IUD, кардіостимулятори, дефібрилятори, нейростимулятори, насоси для

▲ Використовувати обережно у пацієнтів з тромбофлебітом, цереброваскулярними захворюваннями (наприклад, пацієнти з інсультом), пошкодженнями

Глава 5 Обслуговування обладнання

5.1 Очищення основного блоку

Очистити головний блок м'якою, вологою тканину, але уникнути рідини, що входить в інструмент.

5.2 Очищення ручки обробки

Регулярно очистити ручку обробки та витерте ручку обробки бавовняною тканинною або бавовняною кулькою,

Ручка обробки уникає удару та паду, якщо вона пошкоджена і не може працювати, вам потрібно зв'язатися з дилером, щоб його знову

5.3 Обробка несправностей системи

Таблиця 5-3-1 Обробка несправностей системи

Назва несправності	Метод обробки
Екран не відображається	Перевірте камер живлення
	Перевірте вимикач, сплавальники
	Перевірте перемикач живлення
	Будь ласка, зв'яжіться з продавцем
Кнопка живлення не відповідає	Будь ласка, зв'яжіться з продавцем
Система не може бути ініціалізована	Будь ласка, перевірте живлення
	Будь ласка, зв'яжіться з продавцем

Вихідна енергія слабка або немає вихідної	Чи безпечно включено ручку
	Чи ручка пошкоджена
	Голова лікування перегрівається, вимкніть і охолодьте півгодини перед використанням.
	Будь ласка, зв'яжіться з дилером

Глава 6 Специфікації

У цьому розділі деталізуються найважливіші технічні параметри та системи і категорії

Таблиця 6-1 Таблиця специфікацій системи

Параметр	Дані
Електронно підключені дані	
Напруга лінії:	110/ 220 VAC $\pm$ 10% (див. Система вкладки)
Частота лінії:	5- 100 Гц
Система категорія	
Типи захисту від удару:	Я вписую пристрій

Ступінь захисту від шоку:	Ні
Ступень захисту від шкідливого вторгнення води;	Нормальне обладнання
Кліматичні умови (під час роботи)	
температура навколишнього середовища	+ 15°C до +30°C
Відносна вологота	30% до 80%
атмосферний тиск	86,0 кПа до 106,0 кПа
Кліматичні умови (під час транспорту та зберігання)	
температура навколишнього середовища	-20 °C-+ 60 °C;
Відносна вологота	≤93%, без конденсації
атмосферний тиск	86, 0 кПа-106, 0 кПа
Розміри та вага	44см * 50см * 115см
Розміри приладу	44см * 50см * 115см
Розмір упаковки	50см * 60см * 123см
Вага	72 кг

Рекомендація параметрів клінічного використання

Параметри каналу	Частина лікування	Режим роботи	Параметри Level	Energy	Частота	Час
CH1 (канал 1)	Жівот	Режим EMS	L1/L2 (люди без основних вправ)	70-75%	20-25 Гц	30 хвилин
			M1/M2 (переривне вправ група)	80-85%	20-25 Гц	30 хвилин
			H1/H1 (часто впрацювати група)	85%-90%	20-30 Гц	30 хвилин
		РФ режим	—	60%	—	3 10 хвилин
		EMS + RF режим	L1/L2 (люди без основних вправ)	1. РФ: 60%	—	5хвилин
				2. EMS: 70-75%	20-25 Гц	30 хвилин
				3. РФ: 60%	—	5хвилин
			M1/M2 (переривне вправ група)	1. РФ: 60%	—	5хвилин
				2. EMS: 80-85%	20-25 Гц	30 хвилин
				3. РФ: 60%	—	5хвилин
			H1/H1 (часто впрацювати група)	1. РФ: 60%	—	5хвилин
				2. EMS: 85-90%	20-30 Гц	30 хвилин
				3. РФ: 60%	—	5хвилин
CH1 (канал 1)	стегно	Режим EMS	L1/L2 (люди без основних вправ)	60-65%	25 Гц	30 хвилин
			M1/M2 (переривне вправ група)	70-75%	30 Гц	30 хвилин
			H1/H1 (часто впрацювати група)	80%-85%	35- 40Гц	30 хвилин
		РФ режим	—	60%	—	3 10 хвилин

		EMS + RF режим	L1/L2 (люди без основних вправ)	1. РФ: 60%	—	5хвилини
				2. EMS: 60-65%	25 Гц	30 хвилини
				3. РФ: 60%	—	5хвилини
			M1/M2 (переривне вправ група)	1. РФ: 60%	—	5хвилини
				2. EMS: 70-75%	30 Гц	30 хвилини
				3. РФ: 60%	—	5хвилини
			H1/H1 (часто впрацювати група)	1. РФ: 60%	—	5хвилини
				2. EMS: 80-85%	35- 40Гц	30 хвилини
				3. РФ: 60%	—	5хвилини
CH1 (канал 1)	Міднік	Режим EMS	L1/L2 (люди без основних вправ)	65-70%	20 Гц	30 хвилини
			M1/M2 (переривне вправ група)	75-80%	15 Гц	30 хвилини
			H1/H1 (часто впрацювати група)	85%-90%	10Гц	30 хвилини
		РФ режим	—	60%	—	3 10 хвилини
		EMS + RF режим	L1/L2 (люди без основних вправ)	1. РФ: 60%	—	5хвилини
				2. EMS: 65-70%	20 Гц	30 хвилини
				3. РФ: 60%	—	5хвилини
			M1/M2 (переривне вправ група)	1. РФ: 60%	—	5хвилини
				2. EMS: 75-80%	15 Гц	30 хвилини
				3. РФ: 60%	—	5хвилини
			H1/H1 (часто впрацювати група)	1. РФ: 60%	—	5хвилини
				2. EMS: 85-90%	10Гц	30 хвилини
				3. РФ: 60%	—	5хвилини
CH2 (канал 2)	стегно	Режим EMS	L1/L2 (люди без основних вправ)	60-65%	25 Гц	30 хвилини

			M1/M2 (переривне вправ група)	70-75%	30 Гц	30 хвилин
			H1/H1 (часто впрацювати група)	80%-85%	35- 40Гц	30 хвилин
		РФ режим	—	60%	—	3 10 хвилин
		EMS + RF режим	L1/L2 (люди без основних вправ)	1. РФ: 60%	—	5хвилин
				2. EMS: 60-65%	25 Гц	30 хвилин
				3. РФ: 60%	—	5хвилин
			M1/M2 (переривне вправ група)	1. РФ: 60%	—	5хвилин
				2. EMS: 70-75%	30 Гц	30 хвилин
				3. РФ: 60%	—	5хвилин
			H1/H1 (часто впрацювати група)	1. РФ: 60%	—	5хвилин
				2. EMS: 80-85%	35- 40Гц	30 хвилин
				3. РФ: 60%	—	5хвилин
CH2 (канал 2)	Шин	Режим EMS	L1/L2 (люди без основних вправ)	65-70%	10- 15Гц	30 хвилин
			M1/M2 (переривне вправ група)	75-80%	20-25 Гц	30 хвилин
			H1/H1 (часто впрацювати група)	75%-85%	25-30 Гц	30 хвилин
		РФ режим	—	60%	—	3 10 хвилин
		EMS + RF режим	L1/L2 (люди без основних вправ)	1. РФ: 60%	—	5хвилин
				2. EMS: 65-70%	10- 15Гц	30 хвилин
				3. РФ: 60%	—	5хвилин
			M1/M2 (переривне вправ група)	1. РФ: 60%	—	5хвилин
				2. EMS: 75-80%	20-25 Гц	30 хвилин
				3. РФ: 60%	—	5хвилин
			H1/H1 (часто впрацювати група)	1. РФ: 60%	—	5хвилин

CH2 (канал 2)	Ручка			2. EMS: 75-85%	25-30 Гц	30 хвилин
				3. РФ: 60%	—	5хвилин
		Режим EMS	L1/L2 (люди без основних вправ)	60-65%	15- 20Гц	30 хвилин
			M1/M2 (переривне вправ група)	70-75%	20-25 Гц	30 хвилин
			H1/H1 (часто впрацювати група)	80%-85%	30- 35Гц	30 хвилин
		РФ режим	—	60%	—	3 10 хвилин
		EMS + RF режим	L1/L2 (люди без основних вправ)	1. РФ: 60%	—	5хвилин
				2. EMS: 60-65%	15- 20Гц	30 хвилин
				3. РФ: 60%	—	5хвилин
			M1/M2 (переривне вправ група)	1. РФ: 60%	—	5хвилин
				2. EMS: 70-75%	20-25 Гц	30 хвилин
				3. РФ: 60%	—	5хвилин
			H1/H1 (часто впрацювати група)	1. РФ: 60%	—	5хвилин
				2. EMS: 80-85%	30- 35Гц	30 хвилин
				3. РФ: 60%	—	5хвилин

Примітка: 1. Параметр також підходить для подушки щастя.

2. Клінічні керівники повинні почати з низької енергії

3. Оптимальне енергійне значення є: максимальне значення енергії, яку клієнт може

Рекомендація параметрів клінічного використання

Параметри каналу	Енергія Леваль	Параметри режиму			Параметри каналу	Енергія Леваль	Параметри режиму			Канал	Енергія Леваль	Параметри режиму		
Канал 2	Низько (Люди без основних вправ)	RF	Енергія	60%	Канал 2	Середні (Переривне в правальне населення)	RF	Енергія	60%	Канал 2	Високий (Часто впрацювати населення)	RF	Енергія	60%
			Час	5хвилин				Час	5хвилин				Час	5хвилин
		сесіон1	Енергія	70%			сесіон 1	Енергія	80%			сесіон 1	Енергія	85%
			Частота	17 Гц				Частота	27 Гц				Частота	39 Гц
			Час	10 хвилин				Час	10 хвилин				Час	10 хвилин
		сесіон2	Енергія	75%			сесіон	Енергія	85%			сесіон	Енергія	90%

			Частота	22ч			2	Частота	32ч			2	Частота	45 Гц
			Час	5хвил ин				Час	5хви лин				Час	5хвил ин
		сесіон 3Comment	Енергія	75%			сесіон 3Comm ent	Енергія	85%			сесіон 3Com ment	Енергія	90%
			Частота	22ч				Частота	32ч				Частота	45 Гц
			Час	10 хви лин				Час	10 хв илин				Час	10 хв илин
		сесіон4	Енергія	70%			сесіон 4	Енергія	80%			сесіон 4	Енергія	85%
			Частота	17 Гц				Частота	27 Гц				Частота	39 Гц
			Час	5хвил ин				Час	5хви лин				Час	5хвил ин
		RF	Енергія	60%			RF	Енергія	60%			RF	Енергія	60%
			Час	5хвил ин				Час	5хви лин				Час	5хвил ин
Канал 4	Низько (Люди без ос новних впра в)	RF	Енергія	60%	Канал 4	Серед ини (Перер ивне в правав альне наसे лення)	RF	Енергія	60%	Канал 4	Високий (Часто вп рацюват и насе лення)	RF	Енергія	60%
			Час	5хвил ин				Час	5хви лин				Час	5хвил ин
		сесіон1	Енергія	70%			сесіон 1	Енергія	80%			сесіон 1	Енергія	85%
			Частота	17 Гц				Частота	27 Гц				Частота	39 Гц
			Час	10 хви лин				Час	10 хв илин				Час	10 хв илин
		сесіон2	Енергія	75%			сесіон 2	Енергія	85%			сесіон 2	Енергія	90%
			Частота	22ч				Частота	32ч				Частота	45 Гц
			Час	5хвил ин				Час	5хви лин				Час	5хвил ин
		сесіон	Енергія	75%			сесіон	Енергія	85%			сесіон	Енергія	90%

		3Comment	Частота	22ч			3Comm ent	Частота	32ч			3Com ment	Частота	45 Гц
			Час	10 хви лин				Час	10 хв илин				Час	10 хв илин
		сесіон4	Енергія	70%			сесіон 4	Енергія	80%			сесіон 4	Енергія	85%
			Частота	17 Гц				Частота	27 Гц				Частота	39 Гц
			Час	5хвил ин				Час	5хви лин				Час	5хвил ин
		RF	Енергія	60%			RF	Енергія	60%			RF	Енергія	60%
			Час	5хвил ин				Час	5хви лин				Час	5хвил ин

Примітка: 1. Клінічні керівники повинні бути ініціалізовані з

2. Оптимальне енергійне значення є: максимальне значення енергії, яку клієнт може