
Підручник користувача з MuseShape Pro



Зміст

Ручник користувача 1	1
MuseShape Pro1	1
Глава 1 Інформація користувачів 4	4
1.1 Заходи безпеки 4	4
1.2 Навчання користувачів 4	4
1.3 Механічна та електрична безпечна	4
2.2.1 Склад структури обладнання6	6
Виконання8	8
параметр 8	8
2.3 Діапазон обробки обладнання8	8
2.4 Аксесуари для продукті8	8
Глава 4 Інструкції з експлуатації програмного забезпечення	10
4.1 Сторінка посадки 10	10
4.2 Робочий між 11	11
4.2.1 Опис робочого інтерфейсу 11	11
Таблиця 4-2-1 Опис робочого міжнародного 11	11
4.2.2 Опис робочого інтерфейсу 12	12
4.3 Інструкції з експлуатації фонового	13
4. 7 Клінічна операція16	16
4.7 Запобіжні заходи після лікування 21	21
Глава 5 Підтримка обладнання 22	22
5.1 Очищення хост22	22
5.2 Очищення ручки обробки 22	22
5.3 Інструкції для очищення хоста та ручка22	22
5.4 Вирішення несправностей системних 24	24

Глава 1 Інформація

Перед використанням оператор повинен ретельно прочитати посібник користувача та ретельно перевірити, чи працюють різні функції обладнання. Непотрібна шкода.

1.1 Заходи безпеки

* Коли системний процесор запускається, процесор виконує самотестування. Під час обробки процесора проводить самотестування безперервно і від часу Час.

* У надзвичайному ситуації, будь ласка, вчасно відключи живлення, щоб вимкнути пристрій. Примітка: лише персонал, навчаний дилером, має право підтримувати внутрішні об'єкти інструменту. Будь-яка несанкційна обробка може завдяки шкоди інструменту та скасувати

1.2 Підготовка користувачів

Не будьте повними під час обробки, принаймні 1 годину після їжі, на корпусі не повинні бути необхідно розмістити жодних металевих предметів під час роботи на приладі. Операційна частинка та зонд обробки

Повинні бути сухою та сухою, без води або вологою, і повинна забезпечити експлуатаційну енергію. Він відрізняється від людини до людини, починаючи з низької

Зростають.

1.3 Обладнання механічна та електрична безпека

Джерело живлення, використовується обладнанням, є однофазним живленням 200V ~ 240V (50/60 Гц), міжнародний стандарт (120сV ~ 260V, 50/60 Гц); 10A (90 ~ 130V, 50/60 Гц) однофазна тридротова розетка.

Обладнання контактує з землею через три дроти, а землею

Дріт повинен бути надійно приземлений. Тільки уповноважений персонал може ремонтувати обладнання, інакше гарантія буде

Примітка: уникайте використання вогневогневих матеріалів, таких як ацетон та алкоголь, у При дезинфекції обладнання використовуючи спирт-містячи продуктами, переконайтеся, що алкоголь повністю випарується, Операція.

Глава 2 Вступ з продукту

2.1 Огляд продукту

MuseShape використовує вакуумний вакуум, механічний прокаток, складання шкіри тощо

Технологія, яка буде пристроєм для формування та зморшки для всіх частин людини

Тіло, який допомагає жирних клітин сильно метаболізувати та розкласти, приносячи новий

2.1.1 Принцип роботи:

1. Інфрачервоний лазер 940 нм може зменшити стійкість шкіри для нагрівання шкіри.

Дозволяє енергію РФ глибоко проникати в сполучну тканину; Інфрачервоний лазерний і енергія RF працюють разом, щоб розповсюдити кисню в організмі через


2. Вакуумна та спеціально розроблена експлуатація роликів підвищує проникнення радіочастотного У той же час вакуум і механічний ролик діють Одночасно механічна сила досягає волоконної сполучної тканини, що ефективно покращує метаболізм, зменшує або зменшує розмір жирної порожнини та значно покращує контурний ефект організму.

2.1.2 Показання:

- 1) Вилучити темні кола та зморшки навколо очей; Покращити мішки за очей навколо очей;
- 2) Підніміть верхньої очки та зняти зморшки;
- 3) Формування тіла;
- 4) розчинити жиру та затягувати шкіру (руки, ноги, плечі, спину, сидниці, талію та живот),
- 5) Зменшити біль у суглобах та проводити фізіотерапію всього
- 6) Поліпшити розтяги.

Примітка: цей продукт не є медичним пристроєм, будь ласка, не використовуйте його для лікування

2.2 Структура та продуктивність продукту

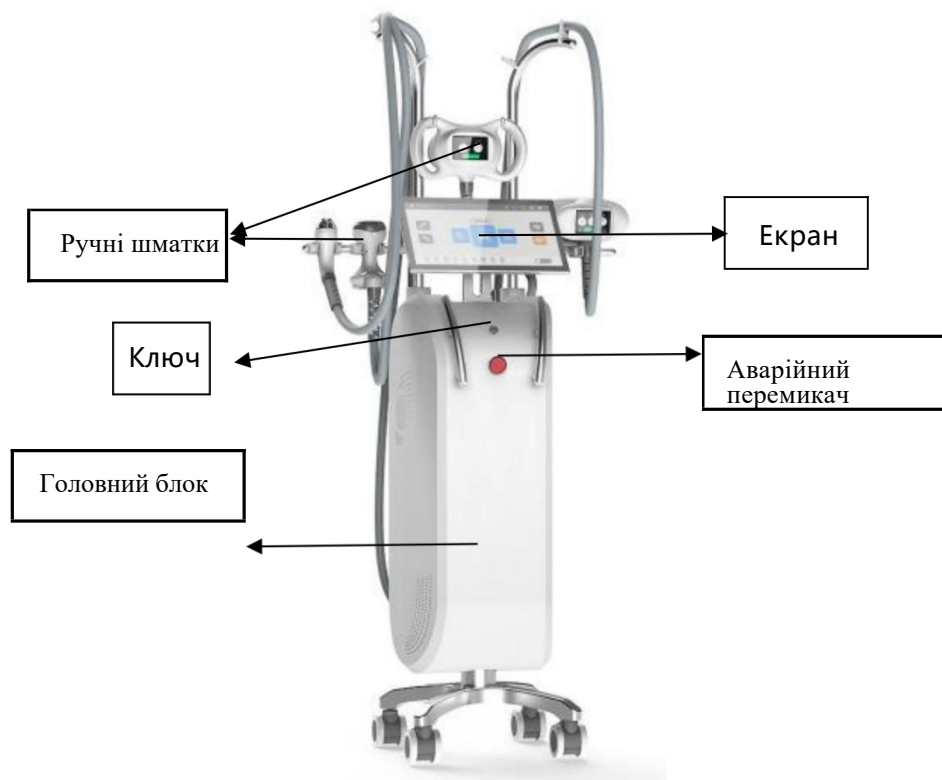

Модуль керування та ручка обробки. Модуль керування включає в себе живлення Перемикач і екран керування; Екран керування є 13-дюймовим дисплеєм Android, а його головки лікування є 4 типи лікування, а саме вакуумний RF № 1. Ручка, вакуумна ручка № 2 і вакуумна ручка № 3. І 40 км розбувається жирна ручка голови.

2.2.1 Склад структури обладнання

2. 2. 1 Хост

Для пристрою хост є його зовнішнім виглядом, а також є носієм інших компонентів продукту. Восет MuseShape як правило складається з наступних частин:

- * Модуль живлення: живлення всієї системи обладнання є джерелом живлення для роботи обладнання.
- * Модуль керування: як центр керування обладнанням, він керує вихідним обладнанням шляхом отримання та дії на вхідній інформації, тим самим реалізує функції, необхідних дизайну, і
- * Модуль відображення: як інтерфейс взаємодії людини між комп'ютером, він відображає різну інформацію про систему та

2.2.1.2 Панель керування

Робота MuseShape в основному завершується модулем керування, який в основному включає наступні частини:

- * Вмикач живлення: увімкніть пристрій, щоб підключити пристрій до живлення.
- * Екран керування: Як інтерфейс взаємодії людини між комп'ютером, він відображає операційні параметри та


2.2.1.3 Лікувальна ручка

Лікування ручка є основним корпусом операції, включаючи зав'язок та голову лікування. Повідки оснащені живленнями та кабелями даних; Голова лікування показано на малюнку 2-2-2.

	<p>№ 1 вакуумний ролик RF ручка</p>	<p>Для лікування кінцівок, талії та живота</p>
---	---	--

	<p>№ 2 вакуумна ручка радиочастотного</p>	<p>Для лікування на всіх частин тіла, крім очей</p>
	<p>№ 3 вакуумна ручка радиочастотного</p>	<p>Для лікування шиї, обличчя, очів</p>
	<p>№ 4 40K кавітаційна ручка</p>	<p>Для лікування талії, ядниці, живота</p>

2.2.1.4 Введення портів на екрані операційної системи Android

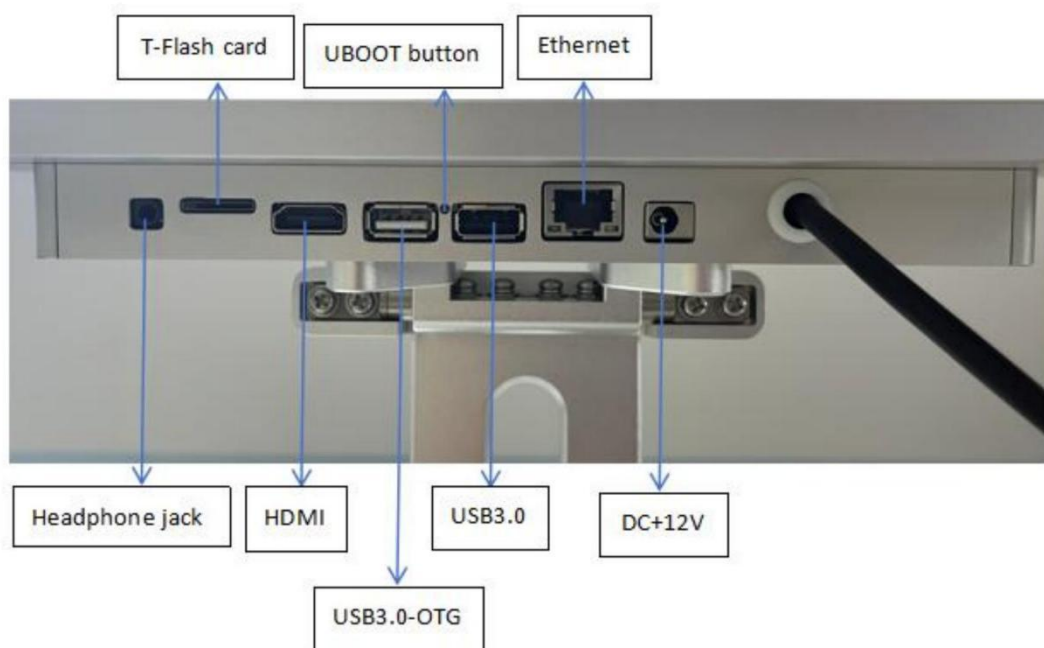

2.2.2 Параметри продуктивності продукту

Таблиця 2-2-1 Таблиця параметрів продуктивності продукту

Виконання	Параметр
Загальна потужність	400W
Швидкість барабану ручного інструменту	0- 360б/хм
RF	1 МГц/ 4 МГц
Лазерна хвиля хвилі	940 нм
Лазерна частота	25 Вт (макс.)
Відносне вакуумне значення	30 кПа-60 кПа
Ультразвукова частота	40 кГц
Кількість ручок	4
Інтерфейс роботи	15,6 дюймовий екран Android

2.3 Діапазон обробки обладнання

MuseShape в основному використовується для формування, втрати ваги та видалення зморшків.

2.4 Аксесуари для продукту

Компоненти продуктів MuseShape показані в таблиці 2-4-1

Таблиця 2-4-1 Список аксесуарів продуктів MuseShape

Назва аксесуарів	Кількість	Назва аксесуарів	Кількість
Філіпс винтвити	1	Нітрильне ущільнення кільце	10
Пинцети	1	Складаний відра	2
Бавовна фільтра етерної олії	3	Фільтрування напівфабрики	1
Шестикутний ключ	1	Посібник з встановлення MuseShape	1

Глава 3 Встановлення обладнання

3.1 Процес встановлення обладнання

Обладнання повинно бути встановлено в середовищі, де немає корозійного газу, пилу та менше частинок. Корозійний газ пошкодить електронні та механічні компоненти та з'єднання проводу обладнання. більше пилу і частинок в Повітря може завдяки пошкодженню фільтрів та електричних Діапазон температури та вологості середовища монтажу обладнання повинен Вимоги до параметрів продуктивності обладнання. Процес встановлення обладнання:


* Вийміть пристрій..


* Залишайте видалений пристрій протягом один день, щоб уникнути надмірної вологості та пошкодження пристрою через

* Коли вологості пристрою належна, збірте різні частини

Пристрій, і включений інтерфейс розетки ручки та інтерфейс розетки хоста відповідно до дисплея етки, щоб забезпечити стабільність з'єднання кожного інтерфейсу

* Після підключення всіх компонентів та живлення, відкрийте пристрій та перевірте його продуктивність та параметри системи за умовами, щоб гарантувати правильне

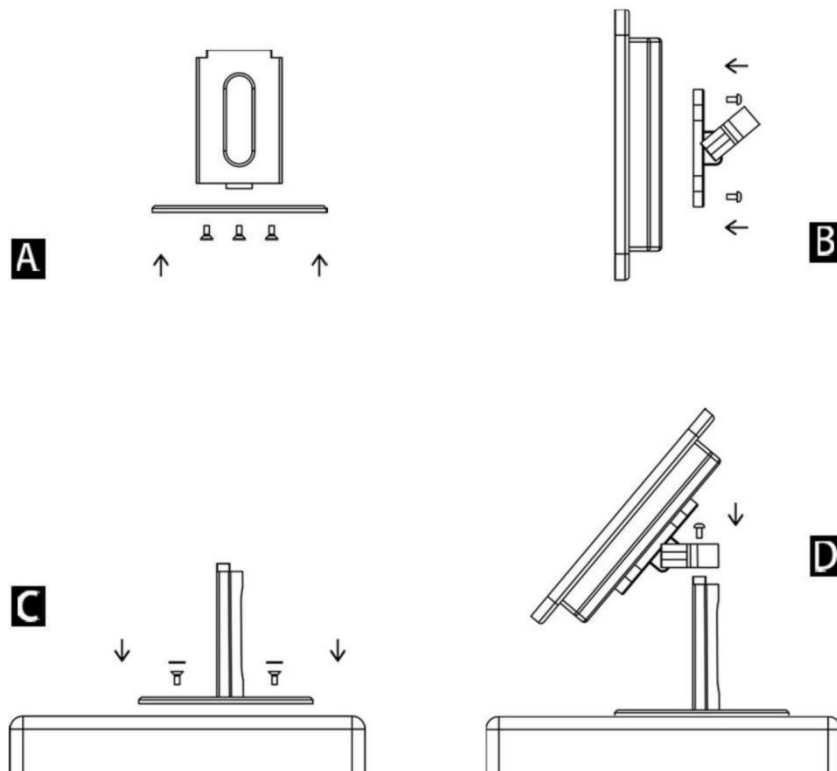

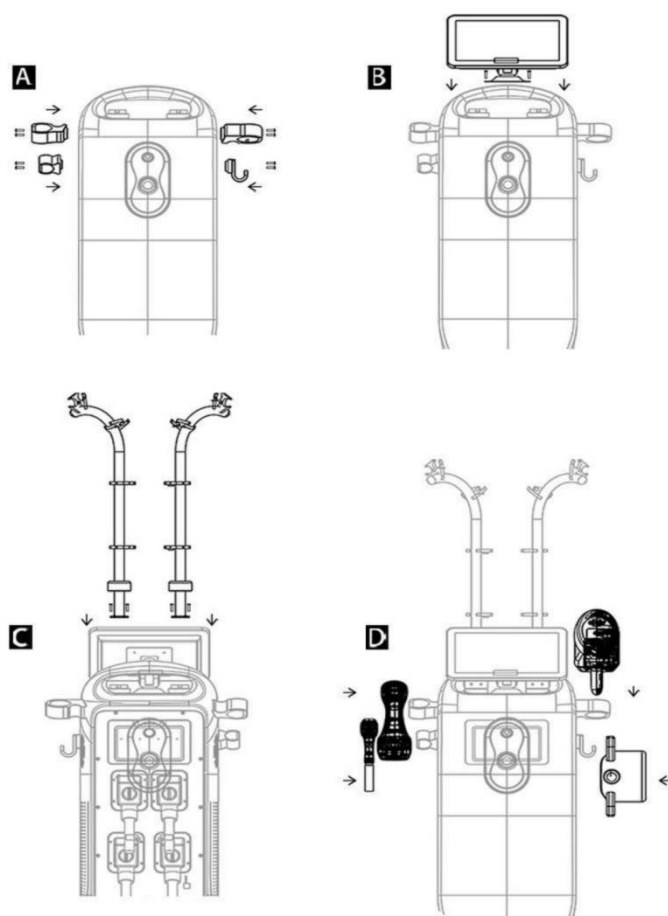

Глава 4 Інструкції з експлуатації програмного

4.1 Сторінка посадки

4.1.1 Опис сторінки посадки

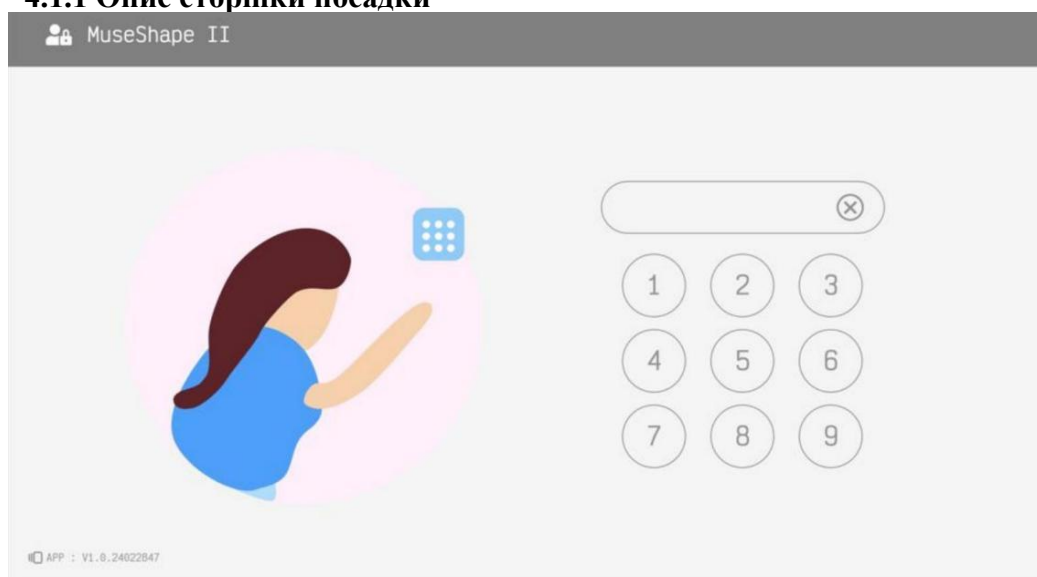


Рисунок 4-1-1

4.1.2 Опис сторінки посадки


Таблиця 4-1-1 Опис робочого інтерфейсу

	Піктограма	Назва	Функція
Використання		Кнопка вилучити	Вилучити введений користувач зображення 1
		Клавіатура пароля	Клавіатура введення пароля

Довжина пароля сторінки входу є фіксованою 8 цифром, діапазон 1-9, пароль для входу за замовчуванням 88888888, коли довжина пароля дорівнює 8 цифром,

Система визначає, чи правильний пароль сама по себе. Якщо ви правильно введете робочу сторінку, інакше пароль оновлення неправильний.


4. 2 Робочий інтерфейс

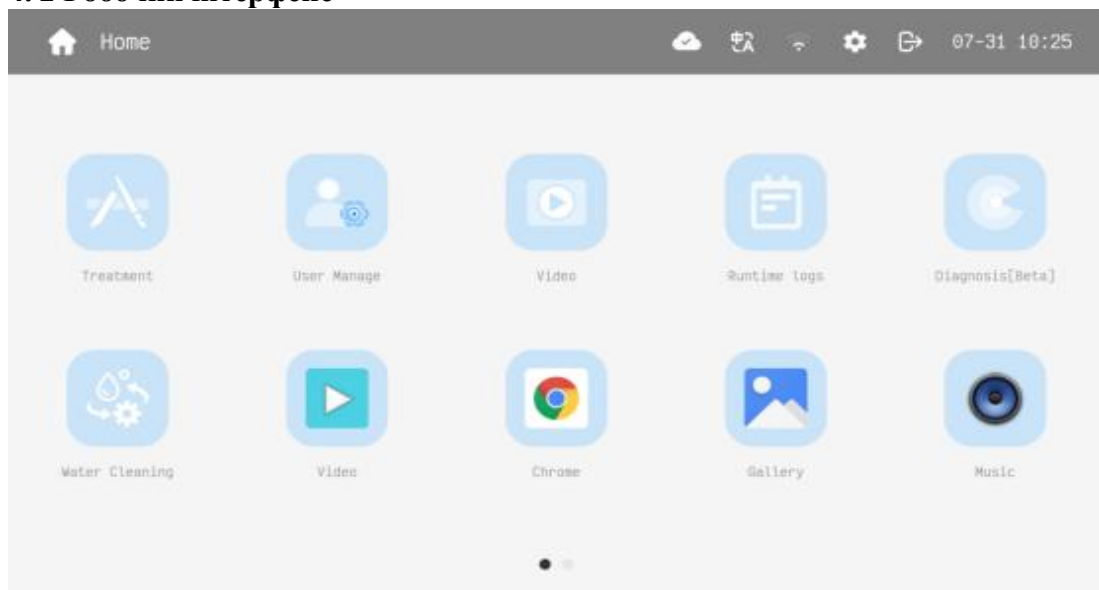

4

4.2.1 Опис робочого інтерфейсу

Таблиця 4-2-1 Опис робочого інтерфейсу

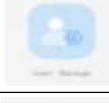	Піктограма	Назва	Функція
Кнопка параметр и користув ача		Вхід робочого інтерфейсу	Натисніть, щоб ввести до робочого
		Запис користувача інтерфейсу	Натисніть, щоб ввести користувачий
		Вхід модуля самотестування газу	Натисніть, щоб ввести модуль самотестування газової
		Вхід модуля очищення водних	Натисніть, щоб ввести модуль очищення водного

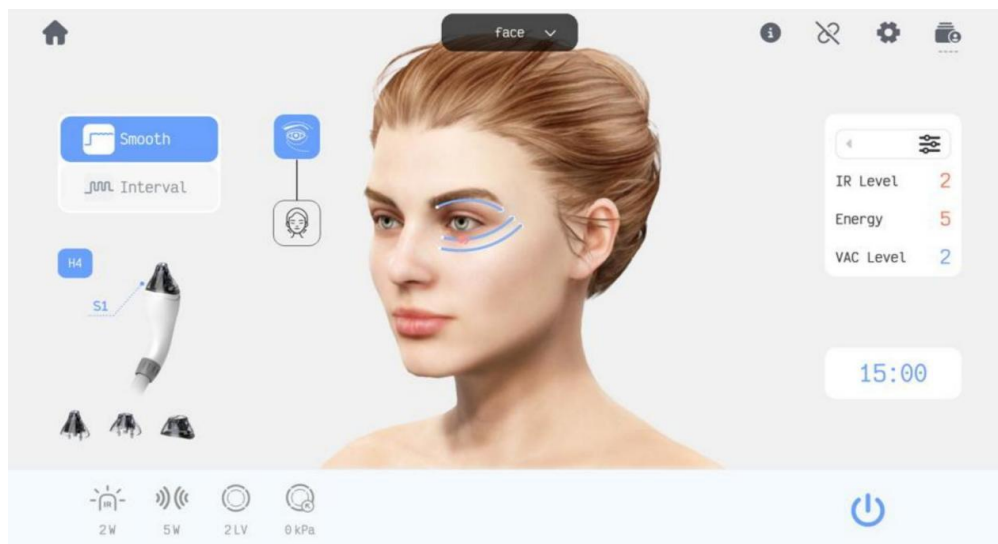


Рисунок 4-2-1

4.2.2 Опис робочого інтерфейсу

Таблиця 4-2-1 Опис робочого інтерфейсу

	Піктограма	Назва	Функція
Кнопка користувача		Вибір обробки	Натисніть, щоб вибрати середню ручку
		Вибір обробки	Натисніть, щоб вибрати маленьку вакуумну
		Вибір обробки	Натисніть, щоб вибрати ручку з вибухом жиру
		Вибір обробки	Натисніть, щоб вибрати велику ручку
		Вибір частин обробки	Пересувати, щоб вибрати область обробки
		Інфрачервоний налаштування	Налаштувати інфрачервону
		Налаштування RF	Налаштувати енергію RF
		Вакуумна налаштування	Налаштувати рівень вакууму

	Налаштування колеса	Налаштування швидкості колеса
	Налаштування напрямку колеса	Конфігурація напрямку обертання
	Поточне значення вакууму	Поточний відображай вакуумної значення
	Налаштування тривалості лікування	Оновлення робочого стану в реальному часі
	Почати зупинити	Не оновлюється непрацюючий стан
	Назад на стільну стільну	Назад на стільну стільну
	Медичні документи	Натисніть, щоб ввести в інтерфейс медичних записів
	Стан з'єднання	Стан з'єднання хоста і екрана
	Допомога	Перемикає налаштування яскравості
	Налаштування тла	Перемикає на сторінку відтворення музики

4.3 Інструкції з експлуатації фонових


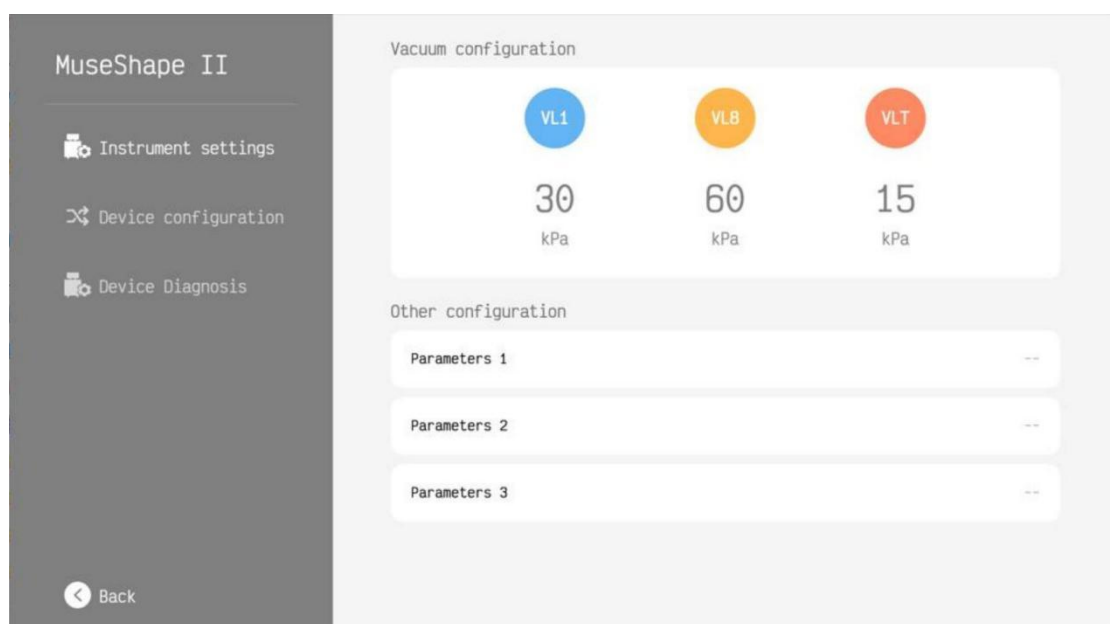


Рисунок 4-3-1

Таблиця 4-3-1 Опис фонових інтерфейсу

Піктограма		Назва	Функція
Інтерфейс фоновий інтерфейсу		Вакуумний рівень 1	Значення тиску, коли вакуумна передача 1 налаштується Діапазон 30 ~ 60 кПа
		Вакуумний рівень 8	Налаштувати значення тиску, коли вакуумна передача становить 8 Діапазон 30 ~ 60 кПа
		Вихідний порог вакууму RF/кавітації	Налаштувати порог вихідного вихідного, буде виведено, коли він вище порогового

4.4 Модуль самотестування газової схеми

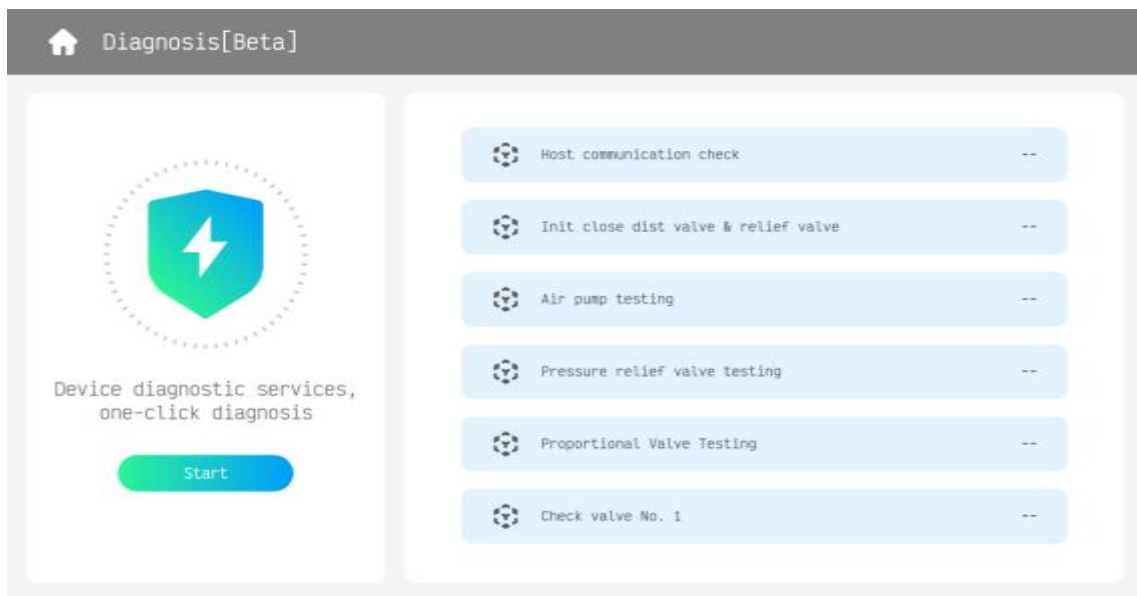

Модуль самотестування поділяється на дві частини: джерело повітря та виявлення вузла повітря. Джерело повітря включає повітряний насос, клапан зменшення тиску та пропорційний клапан. Він керує та виявляє, чи значення тиску повітря в нормальному діапазоні через контроль програми Виявлення вузла повітряної схеми включає фільтровний резервуар, 4-сторонний соленоидний клапан та швидкий штепель.

4.4.1 Етапи самоперевірки повітряної схеми

- * Крок 1: натисніть , щоб ввести в розділ випробування джерела повітря, який в основному перевіряє повітряний насос, клапан зменшення тиску
- * Крок 2: після завершення тесту виявиться запит для встановлення ручника. Після встановлення всіх рукоштоків натисніть "Наступне", щоб перейти до тестування вузла
- * Крок 3: Після завершення тесту, якщо знайдено будь-який код несправностей, натисніть «Звіт», щоб переглянути

4.4.2 Коди несправностей та аналіз

Код несправності	Аналіз
err01	Несправність встановлення резервуара нижнього фільтра/
err02	Клапан зменшення тиску неправильний

err03	Пропорційний клапан несправний
err04	Відмова клапана № 1/інструмент не включений
err05	Відмова клапана № 2/інструмент не включений
err06	Відмова клапана № 3/інструмент не включений
err07	Відмова клапана № 4/інструмент не включений

4.4.3 Практичне застосування самовипробування повітряної схеми

1. Під час роботи тиск повітря не знаходиться в вказаному діапазоні.
2. Після тривалої операції тиск повітря виявлено нижчий за вказаний діапазон.
3. Після очищення води тиск повітря виявляється нижчим за вказаний діапазон після робочої поверхні на 10 хвилин.

4.5 Детальні процедури роботи пристрою

* Перед лікуванням оператор проведе детальне обговорення з пацієнтом, щоб забезпечити, що вони відповідають

* Введіть інтерфейс параметрів обробки;

* Після налаштування параметрів обробки, інфрачервоних



параметрів (підтримується вакуумною ручкою)

параметрів  енергії вибуху RF/жиру, параметрів вакууму, параметрів роликів та

* На сторінці відображається вакуумна функція в режимі реального часу Коли вакуумне значення перевищує порог, вихід RF або жир активується.

4. 6 Протипоказання та заходи

- * Пацієнти з кардіостимулятором або дефібрилятором;
- * Пацієнти з металевими предметами під шкірою;
- * Пацієнти з історією шкірних захворювань або раку;
- * Пацієнти з іншими медичними умовами, такими як серцевий захворювання або
- * Пацієнти, які використовують під час
- * Пацієнти з історією використання гормонів;
- * Пацієнти з незаціленими ранами;
- * Пацієнти з чутливою світлом;
- * Пацієнти з загрованою шкірою;
- * Пацієнти під час менструації.

Особам з вищезазначеними симптомами або медичними умовами заборонено використовувати цей

4.7 Клінічна операція

Курс лікування:

* Обличчя: 30 хвилин лікування кожного разу, одне лікування на тиждень, а курс лікування включає 10 лікування;

* Очи: 15 хвилин кожного лікування, один раз на тиждень, курс лікування включає 10 лікування;

*Весь тіло: 45-60 хвилин, місцеве лікування: 15 хвилин, два лікування на тиждень, один курс включає 10 лікування;

лікування о

* Обов'язкова підготовка: камера, примивальний засіб обличчя, бавовняний тампон для регулювання

* Підготовка до лікування: щоб більш чітко довести функцію машини, враховуючи відчуття клієнта під час використання її; Не використовуйте гормональні препарати за тиждень до лікування. Не приносьте металевих ювелірних виробів

Під час лікування; Зробити фотографії, щоб зберігати записи в однакових умовах

Процес терапії:

- * Перший крок: очистити шкіру, яку треба обробити тепла вода;
- * Другий етап: розмістити регулюючий ефірний олій на шкіру, яка
- * Третій крок: увімкніть машину та налаштувати відповідні параметри;
- * Передній крок: дотримуйте специфікації піктограми інтерфейсу і чекайте, поки час Навчальність лікування: налаштувати параметри відповідно до відчуття І дотримуйте параметри регулювання та напишіть, що обробка обличчя може почати

У місці, де роговий клас товстий, наприклад, кут челюсти. Терапія:

- * Ефективність: підніміть шкіру та затягуйте шкіру.
- * Примітка: коли лоб лікується школовими кістками, знизьте рівень енергії 1-2.

Процедур лікування:

- * Очищення;
- * Покладіть регулюючі етерні масли на шкіру, яка обробляється
- * Послідовність лікування: кут челюсти, щоки, храми, лоб;
- * Вакуумні RF ручні інструменти та параметри: використовувати вакуумні RF ручні інструменти № 3 для Енергія радіочастотного радіочастотного розділу: Вакуум: 2 ~ 4;
- * Інфрачервоний лазерний потужність: 1 ~ 3 Вт.

Спосіб роботи (малюнка 1):

Крок 1: підніміть шкіру

- ① Розтягати шкіру відповідно до текстури шкіри;
- ② Під час лікування підштовхнути і натягніть шкіру іншою рукою;
- ③ Повторіть лікування 2-3 рази.

Крок 2: Повторюйте обробку спеціальних частин: наприклад, носолабіальні складки, лінії лоба, зморшки. Ефективність:

- А) рувна шкіра обличчя;
- б) Зменшити зморшки обличчя;
- с) Затягніть шкіру обличчя.

лікування очей



Зобр

- * Efficacy: Smooth the skin around the eyes, tightens, removes bags under the eyes and dark circles around the eyes;
- * Once a week, each course includes ten treatments.

Етапи лікування:

- * Очищення шкіри;
- * Покладіть регулюючі етерні масли на шкіру, яка обробляється;
- * Вакуумні RF ручні інструменти та параметри: використовувати вакуумні RF ручні інструменти № 3 для лікування
- * Енергія радіочастотного радіочастотного радіочастотного Інфрачервоний лазерний потужність: 1 ~ 3 Вт.

Спосіб роботи (малюнок 2)

Крок 1: підніміть шкіру

- ① Масажуйте і розтягніть очі зв'язку з зовнішньою сторону;
- ② During treatment, use the other hand to push and pull the skin diagonally upward;
- ③ Повторіть область ока 3-4 рази.

Крок 2: Повторюйте та зосередьтеся на лікуванні глибоких зморшків та

Ефективність:

- А) робити шкіру ока рожеву;
- б) Зменшити зморшки очей;
- с) Затягніть і підніміть шкіру ока.

Лікування шиї

Ефективність: піднімка та затягування шкіри шиї, ослаблення * Одного разу на тиждень, кожен курс включає десять лікування.

Етапи лікування:

- * Очищення;
- * Покладіть регулюючі етерні масли на шкіру, яка обробляється;
- * Вакуумні RF ручні інструменти та параметри: використовувати вакуумні RF ручні інструменти № 3 для обробки Енергія радіочастотного радіочастотного розділу: Вакуум: 1-2;
- * Інфрачервоний лазерний потужність: 2Вт ~ 3Вт

Спосіб роботи (малюнок 3)

Крок 1: підніміть шкіру

- ① Масажуйте і розтягніть шию знизу до верху;
- ② Під час лікування шкіру іншою рукою шкірку вперед;
- ③ Повторіть лікування шиї 2-3 рази.
- ④ Уникайте площі яблука Адама.

Крок 2: Повторіть обробку області навколо шиї.

лікування організму


- * Ефективність: затягувати шкіру (живот, спину, талію, стегна, теляти, руки),
- * Прикрашення кривої тіла; Два лікування на тиждень, кожен курс включає десять лікування.

Лікування живота та талії

- * Обов'язкова підготовка: камера, примивальний засіб обличчя, бавовняний тампон для регулювання
- * Підготовка перед лікуванням: щоб більш чітко довести функцію машини та враховувати відчуття клієнта під час використання її; За тиждень до лікування не використовувати гормональні препарати, не приносять металевих ювелірних прикраси У одній фоні та умовах освітлення зробити фотографії, щоб зберігати



Зображення 2

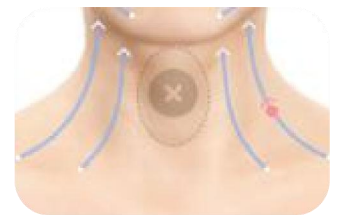

З о б р

Повідомлення:


Запитайте клієнта, як вони відчують, інтенсивність і тепла повинні бути скоригдовані до рівня комфорту. Талія, шлунок і шкірковий жирний шарів біля ребрів тонкі; Під час лікування запитайте клієнта, як вони відчують.

Етапи лікування:

- * Очищення;
- * Покладіть регулюючі етерні масли на шкіру, яка обробляється;
- * Вакуумні RF ручні інструменти та параметри: використовувати вакуумні RF ручні. Енергія радіочастотного радіочастотного розділу: Вакуум: 3 ~ 6; Швидкість: 2 ~ 4;
- * Інфрачервоний лазерний потужність: 3Вт ~ 5Вт;

Спосіб роботи (малюнок 4)

- * Натисніть Роботу, щоб вакуумний ручний інструмент повністю контактувати з шкірою. Якщо ви припините використовувати його під час роботи, натисніть кнопку екрану вакуумної ручної інструменти або натисніть кнопку
- * Змінити спосіб використання відповідно до почуття клієнта (гладки/інтервал).

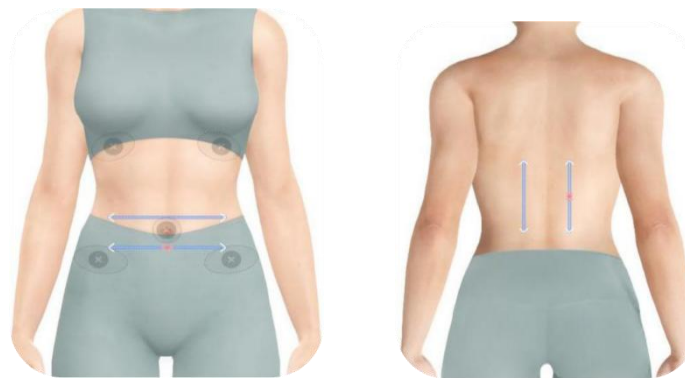

Зображення 4

Лікування спинних


Етапи лікування:

- * Очищення;
- * Покладіть регулюючі етерні масли на шкіру, яка обробляється;
- * Вакуумні RF ручні інструменти та параметри: використовувати вакуумні RF ручні. Енергія радіочастотного радіочастотного радіочастотного
- * Інфрачервоний лазерний потужність: 3Вт ~ 5Вт;

Спосіб роботи (малюнок 6)

Два режими роботи (ковзання/фіксовано);

- * Натисніть, щоб працювати, щоб ручник негативного тиску був повним контактом з шкірою. Якщо ви припините використовувати його під час роботи, натисніть кнопку екрану ручника негативного тиску або натисніть кнопку Робота на
- * Змінити спосіб використання на основі почуття клієнта (гладки/інтервал)
- * Повторюйте вгору і вниз, уникнувши плечних лопатів.

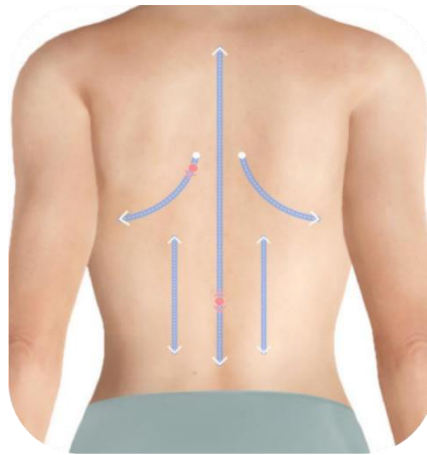

Зображення 6

лікування ніг

Етапи лікування:

- * Очистка
- * Покладіть етерні олії на шкіру, яка буде лікувати;
- * Вакуумні RF ручні інструменти та параметри: використовувати № 1 вакуумні RF ручні інструменти або №
- * Вакуумні ручні інструменти RF; РФ енергія № 1 вакуумного RF ручного інструменту: 35 ~ 45, швидкість обертання: 2 ~ 3;
- * (РФ вакуумної частини ручних інструментів № 3: 30-40);
- * Вакуум ручного інструменту № 1 RF: 40 ~ 50, швидкість обертання: 2 ~ 3;
- * (Вакуум ручного інструменту вакуумного радіочастотного радіочастотного інструменту № 2: 30-40); Швидкість обертання: 2 ~ 3;
- * Інфрачервоний лазерний потужність: 3Вт ~ 5Вт;

Operation method (Picture 7)

Зовнішню всередину, зверху вниз і знизу вверху.



Зображення 7

Лікування верхньої руки

Етапи лікування:

- * Очищення;
- * Покладіть етерні олії на шкіру, яка буде лікувати;
- * Вакуумні RF ручні інструменти та параметри: № 2 вакуумні RF ручні інструменти; Енергія радіочастотного радіочастотного Швидкість: 1 ~ 3;
- * Інфрачервоний лазерний потужність: 2Вт ~ 3Вт.

Спосіб роботи (малюнок 8)

Спочатку лікувати зовнішню сторону верхньої руки, зверху вниз; Потім лікувати всередину частину руки, зверху вниз.



Зображення 8

Лікування сидниці

Етапи лікування:

- * Очищення;
- * Покладіть ефірну олію на шкіру, яка буде лікувати;
- * РФ ручник і параметри негативного тиску: № 1 негативний тиск радіочастотний ручник; Енергія радіочастотної частотної енергії: 25-50, негативний тиск: 2-8; Швидкість: 1 ~ 3;
- * Інфрачервоний лазерний потужність: 2Вт ~ 3Вт.

Спосіб роботи (малюнок 9)

Працюйте ззовні, уникнути центру сидниці.



Зображення 9

4.7 Запобіжні заходи після лікування

- * Не мийте оброблену область холодною водою (крім обличчя) протягом 8 годин після обробки;
- * Уникнути впливу сонця протягом тижня після
- * Рекомендується наносити продукти для догляду за шкірою молоком на оброблену область;

*Не їжте холодну гостру їжу протягом 8 годин після лікування.

Глава 5 Обслуговування обладнання

5.1 Очищення хоста

Використовуйте м'яку вологою тканину для очищення основного блоку, але уникнути рідини внутрішнього інструменту.

5.2 Очищення ручки обробки

* Регулярно очистити ручку обробки та витерте ручку обробки бавовняною тканинною або бавовняною кулькою, зволоженою

* Ручка лікування не слід бити або впасти. Якщо він пошкоджений і не може працювати, вам потрібно зв'язатися з дилером, щоб його

5.3 Інструкції для очищення хоста та ручки

	
(Малюнок 1)	(Малюнок 2)

Крок 1: Приготуйте інструменти для очищення: фільтра, два відра (один наповнений водою)

(Малюнок 1)

Крок 2: Вилучити чотири ручки та помістити їх на чисту плоску поверхню.

(малюнка 2);

		
(Малюнок 3)		(Малюнок 4)

Крок 3: Вставте водовий сопл у основну блоку та помістите фільтр вхідного води в чистий відр (малюнка 3)
Крок 4: натисніть екран, щоб входити в інтерфейс очищення (малюнка 4);

		
(Малюнок 5)		(Малюнок 6)

Крок 5: тримайте інструмент проти порожнього відра і чекайте, поки вода не вичерпиться (малюнка 5);
Крок 6: натисніть екран, щоб перейти на інші канали для очищення (малюнка 6);

		
(Малюнок 7)		(Малюнок 8)

Крок 7: замінити інструменти, які потрібно очистити, і витокувати воду (малюнок 7);

Крок 8: після очищення всіх інструментів вісіть їх на основному блоку та поставьте інші частини назад на місце (малюнка 8).

Примітка: При очищенні ручку вибуху жиру 40 кГц вам потрібно використовувати пинцети для видалення фільтра, щоб запобігти надмірного тиску води, що призводить до сигналу хоста або викликати

5.4 Вирішення несправностей системи

Таблиця 5-3-1 Вирішення несправностей системи

Назва несправності	Підхід
На екрані немає відображення	Перевірте камер живлення
	Перевірте вимикач, запилювач
	Перевірте перемикач живлення
	Будь ласка, зв'яжіться з продавцем
Кнопка живлення не відповідає	Будь ласка, зв'яжіться з продавцем
Система не вдалося ініціалізувати	Будь ласка, перевірте живлення
	Будь ласка, зв'яжіться з продавцем.
Вихідна енергія слабка або немає вихідної	Чи міцно вставлено ручку
	Чи ручка пошкоджена
	Голова лікування перегрівається, вимкніть охолодження півгодини перед використанням
	Будь ласка, зв'яжіться з дилером

У цьому розділі деталізуються найважливіші технічні параметри та системні категорії

Таблиця 6-1 Специфікації системи

Параметр	Дані
• Електронно підключені дані	
Напруга лінії:	110/220 VAC $\pm$ 10% (див. Метикетка системи)
Частота лінії:	50/60 Гц
• Система категорія	
Тип захисту від електричного захисту Шок:	Обладнання І класу
Ступень захисту електричного удару:	без
Ступень захисту від шкідливого вторгнення	Звичайне обладнання
• Кліматичні умови (під час роботи) • Кліматичні умови (під час роботи)	
температура навколишнього середовища	+ 15°C до +30°C
Відносна вологота	30% до 80%
атмосферний тиск	86,0 кПа до 106,0 кПа
• Кліматичні умови (під час транспортування та зберігання) • Кліматичні умови (під час транспортування та зберігання)	
температура навколишнього середовища	-20 C-+60°C; 
Відносна вологота	$\leq$ 93%, без конденсації
атмосферний тиск	86, 0 кПа-106, 0 кПа
• Розмір і вага	
Довжина	420 мм
Ширина	400 мм
Високий	1140 мм
Вага	60 кг

Додаток І клінічні рекомендовані параметри та цикл лікування музичного шапу (самоочищення)

Місце лікування	Рекомендації ручного інструменту	Детальні частини	Інфрачервоний IR	Радіочастоту Енергія	Всмоктувальний Рівень VAC	Шаблони використання	Час лікування	Швидкість	Напрямок обертання	Цілі лікування	Курс лікування	Зауваження
Обличчя		Околя орбітальної області	2	5	Низьке: 2	Інтервал	15 хвилин	/	/	2 тижні/ 1 раз	10/1 курс лікування	Перед процедурою клінічний інструктор повинен перевірити енергію та температуру на внутрішній стороні зап'ястя. Не налаштовуйте енергію безпосередньо на обличчя або шию, щоб уникнути ризику опіків шкіри. Металеви й ювелірний прикрас не
		Шок і лоб	2	5	Низьке: 2	Інтервал	15 хвилин	/	/	2 тижні/ 1 раз	10/1 курс лікування	
Шия		Шия	2	5	Низьке: 2	Інтервал	15 хвилин	/	/	2 тижні/ 1 раз	10/1 курс лікування	

Ручка		Ручка	2	10	Низьке: 2 початок	Гладко	15 хвилин	/	/	1 тиждень/ 2 рази	10/1 курс лікування	/
Назад		Назад	/	18	Низьке: 2 вгору	Гладко	15 хвилин	/	/	2 тижні/ 1 раз	10/1 курс лікування	/
		Назад	2	10	Низьке: 3 вгору	Гладко	15 хвилин	/	/	1 тиждень/ 2 рази	10/1 курс лікування	/
		Назад	2	8	Низьке: 2 початок	Гладко	15 хвилин	3	M1/m2	1 тиждень/ 2 рази	10/1 курс лікування	/

талія і живот		талія і живот	/	16	Низьке: 2 вгору	Гладко	15 хвилин	/	/	2 тижні/ 1 раз	10/1 курс лікування	/
		талія і живот	2	8	Низьке: 2 вгору	Гладко	15 хвилин	/	/	1 тиждень/ 2 рази	10/1 курс лікування	/
		талія і живот	2	8	Низьке: 1 початок	Гладко	15 хвилин	3	M1/m2	1 тиждень/ 2 рази	10/1 курс лікування	/
Сідниці		Сідниці	/	15	Низьке: 2 початок	Гладко	15 хвилин	/	/	2 тижні/ 1 раз	10/1 курс лікування	/

		Сідниці	2	10	Низьке: 3 вгору	Гладко	15 хвилин	/	/	1 тиждень/ 2 рази	10/1 курс лікування	/
		Сідниці	2	8	Низьке: 1 початок	Гладко	15 хвилин	3	M1/m2	1 тиждень/ 2 рази	10/1 курс лікування	/
Ногка		Ногка	/	15	Низьке: 2 початок	Гладко	15 хвилин	/	/	2 тижні/ 1 раз	10/1 курс лікування	/
		Ногка	2	10	Низьке: 2 початок	Гладко	15 хвилин	/	/	1 тиждень/ 2 рази	10/1 курс лікування	/

		Ногка	2	8	Низьке: 1 початок	Гладко	15 хвилин	3	M1/m2	1 тиждень/ 2 рази	10/1 курс лікування	/
--	---	-------	---	---	-------------------------	--------	-----------	---	-------	----------------------	---------------------	---