


Тип: V-980

980 нм діодний лазер для видалення судин

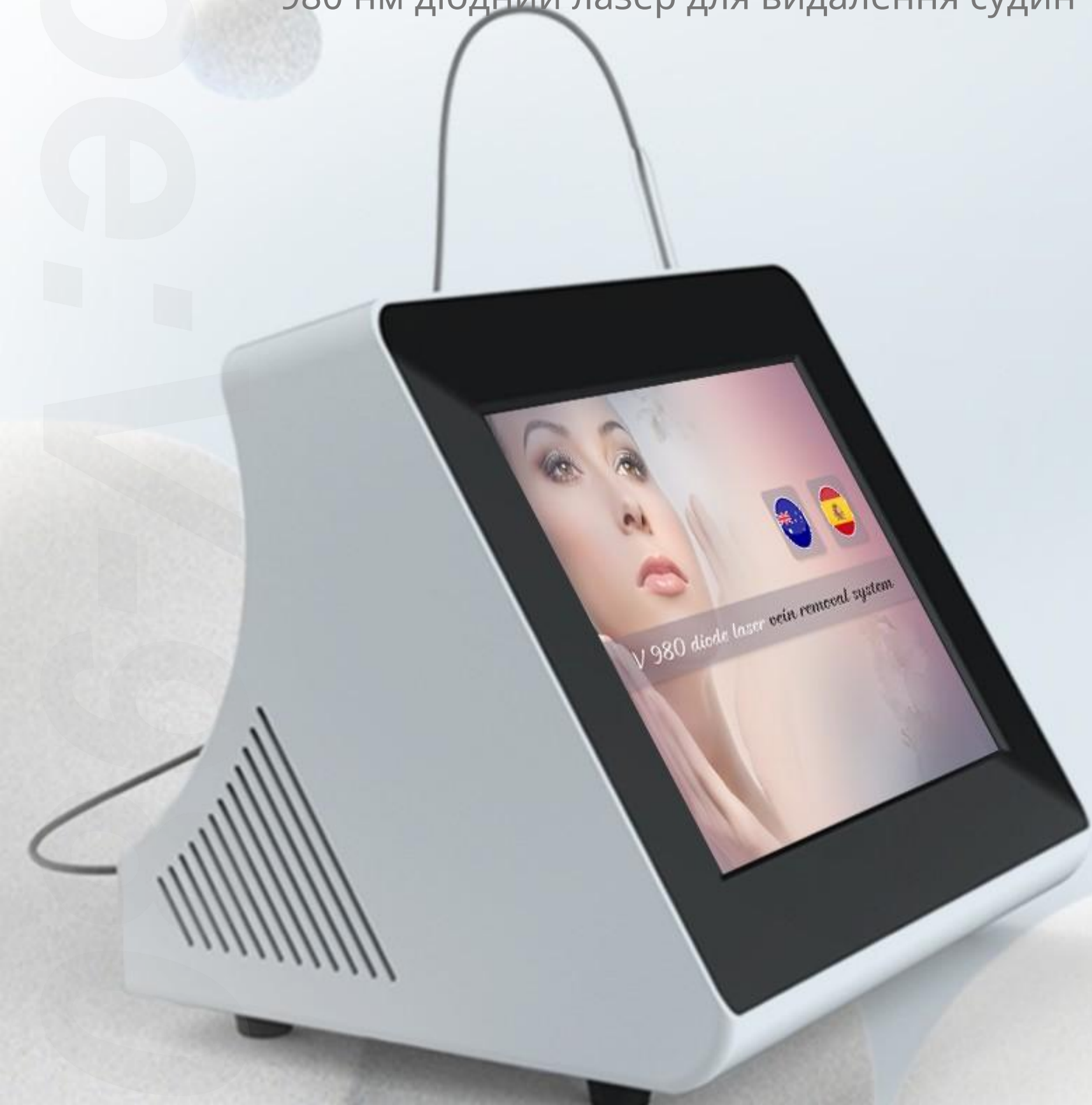

Лікування Терой

- Лазер 980 нм є оптимальним спектром поглинання порфіринових судинних клітин. Судинні клітини поглинають високоенергетичний лазер з довжиною хвилі 980 нм, відбувається твердіння і, нарешті, розсіюється.
- Для подолання традиційного лазерного лікування почервоніння великої області опіку шкіри наконечник професійного дизайну, що дозволяє лазерному променю 980 нм фокусуватися в діапазоні діаметрів 0,2-0,5 мм, щоб забезпечити більш сфокусовану енергію, щоб досягти цільової тканини. уникнення опіків навколишніх тканин шкіри.
- Лазер може стимулювати ріст шкірного колагену під час лікування судин, збільшити товщину та щільність епідермісу, щоб дрібні кровоносні судини більше не були відкритими, в той же час, еластичність шкіри та стійкість також значно підвищуються.



Показання



1. EVLT (лазерне лікування ендовенозних вен)



3. Павутинки/вени на обличчі



2. Терапія судинних уражень



4. Видалення червоних кровоносних судин: всі види телеангіоектазій, вишневі гемангіоми та ін.

Технічні характеристики

Джерело світла

лазер 980 нм

Інтерфейс

Кольоровий сенсорний екран 17 дюймів

потужність

30 Вт (200 Вт)

Ширина імпульсу

20-100 мс регульований

Швидкість повторення

1-5 Гц, регульований

Охолодження

повітря

Розмір машини

400 мм (Ш) * 320 мм (Д) * 350 мм (В)

Розмір упаковки

525 мм (Ш) * 445 мм (Д) * 465 мм (В)

Електричний

220В змінного струму $\pm$ 10% 50 Гц/змінний струм 110 В $\pm$ 10% 50HZ110V




Перевага системи

1. Видалення судин діодним лазером 980 нм є найпередовішою технологією на ринку.
2. Операція дуже проста. Після цього немає ні травм, ні кровотечі, ні шрамів.
3. Професійний наконечник для лікування дизайну простий в експлуатації
4. Для остаточного видалення вен достатньо однієї або двох процедур.
5. Результати можуть тривати довше, ніж традиційний метод.
6. Максимальна вихідна потужність може досягати 50 Вт



Вступ до системи

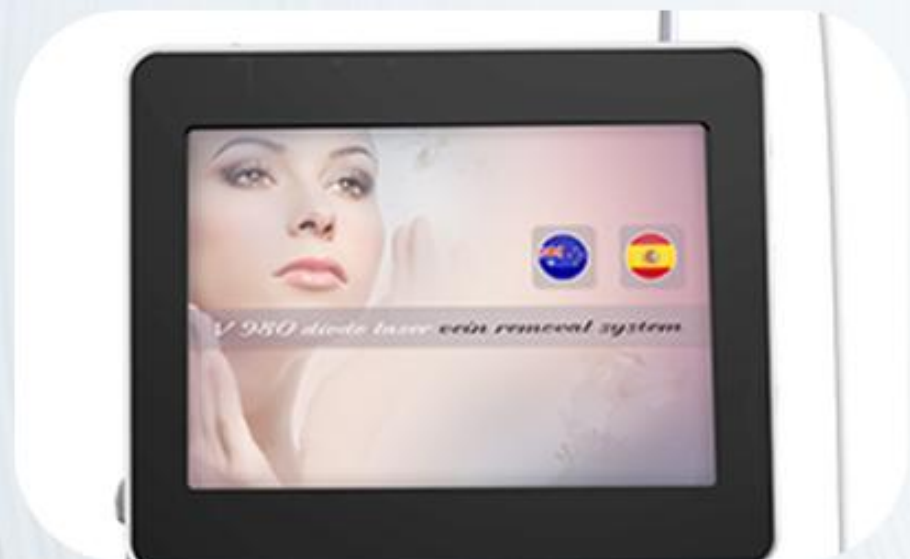

Головні сили



Лікувальний наконечник



Вимикач живлення



Лікування рук
шт. Роз'єм



Основний роз'єм живлення




Роз'єм ножного перемикача



Ножний перемикач

Операційний інтерфейс

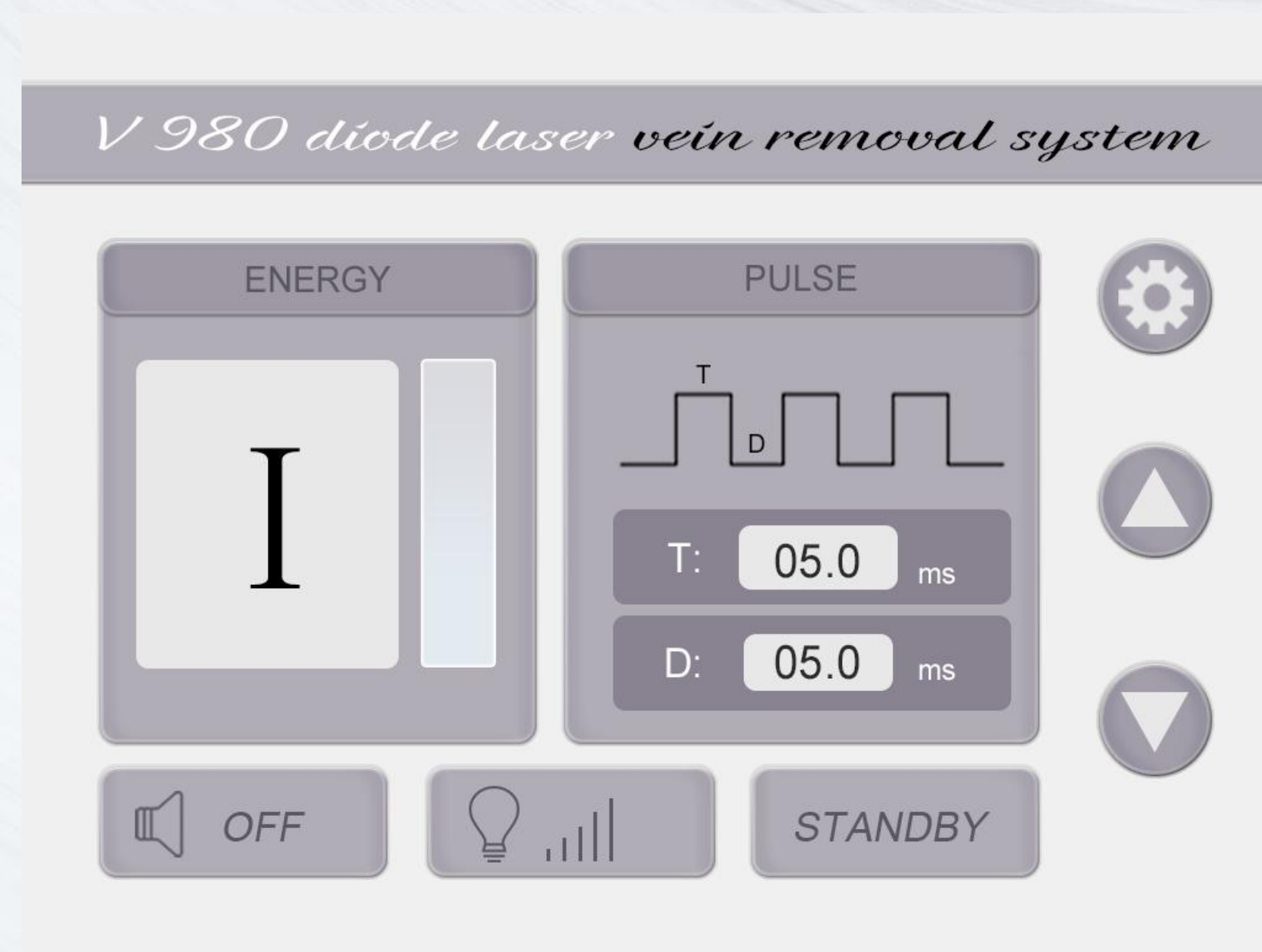

Порядок роботи



1. Увімкніть систему,
натиснувши головний вимикач.



3. Розмістіть наконечник для
лікування на цільовій ділянці та
зробіть світловий напрямок на
судинах.



2. Встановіть параметр лікування та
натисніть кнопку готовності, щоб
змінити режим роботи.



4. Натисніть на ножний перемикач і
почніть лікування.

Інший контраст



Раніше



Після



Раніше



Після



Раніше



Після



Раніше



Після